

ROHO LOW PROFILE

Das Sitzkissen wurde speziell für den aktiven Rollstuhlbewutzer mit geringem Dekubitus Risiko entwickelt. Die 5 cm niedrigen Noppen bewirken eine stabilere Oberfläche, d.h. eine höhere Sitzstabilität bei geringerer Eintauchtiefe. Durch die gebrochene Oberfläche entstehen nur minimale Scherkräfte auf der Haut. Im Alltagsgebrauch zeichnet sich das Kissen durch sein geringes Gewicht und die unkomplizierte Handhabung aus. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

1R1111LPC

51x51 cm




ROHO HIGH PROFILE

Das Sitzkissen gewährt durch seine grosse Eintauchtiefe von 10 cm optimalen Schutz gegen Druckstellen. Die einzelnen Noppen des Kissens sind miteinander verbunden und passen sich individuell an die unterschiedlichen Körpergegebenheiten an. Durch die einzelnen Noppen entsteht eine gebrochene Oberfläche, welche die Scherkräfte auf die Haut minimiert. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

1R1111C

52x52 cm

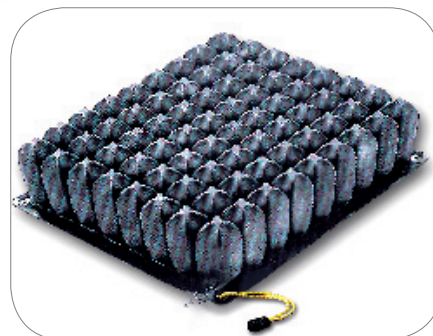

ROHO QUADTRO SELECT

Diese Sitzkissen bieten wirksamen Schutz vor Decubitus und fördern die korrekte Sitzhaltung des Patienten, weiter kombiniert es die optimale Druckverteilung mit der Möglichkeit aktiv zu positionieren.

In 2 verschiedenen Höhen lieferbar 10 cm ¹ + 5 cm ²


Das 4-Kammernsystem sorgt für eine korrekte Sitzposition des Patienten. Mit ihm lassen sich Fehlhaltungen kontinuierlich und progressiv korrigieren.

Dem professionellen Therapeuten wird mit diesem Kissen die Möglichkeit gegeben seine Patienten in die ideale Sitzposition zu bringen. Durch Schliessen des ISOFLAP-Ventils kann diese erreichte Position fixiert werden. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

QS1211C

56x51 cm 10 cm Profil

5 cm Profilkissen auf Bestellung, gleicher Preis

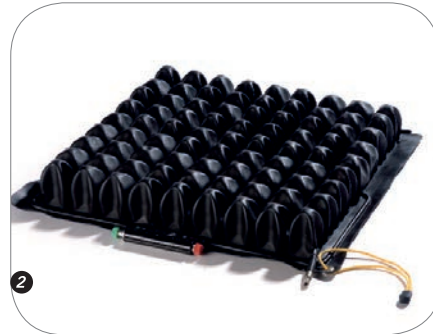

ROHO CONTOUR SELECT


Identischer Aufbau wie die beiden QUADTRO, jedoch zusätzlich mit einer Sitzmulde.

Erhältlich in verschiedenen Grössen.

CS1111C

51x51 cm

Alle Kissen inkl. Überzug

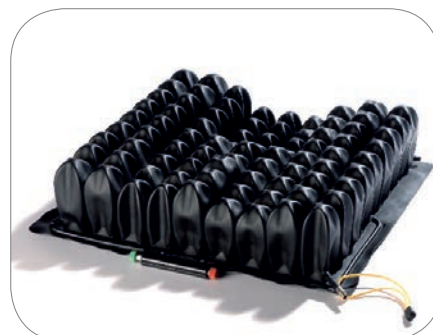

ROHO HYBRID ELITE

Dieses Kissen besteht aus einer JAY J3 Schaumstoffbasis und einem ROHO-Luftkisseneinsatz aus Neopren. Die Jay Schaumstoffbasis gewährleistet Halt und Stabilität und die ROHO-Luftkisseneinlage gewährleistet den optimalen Hautschutz. Das Kissen ist sowohl als 1- wie auch als 2-Ventil/Luftkammer-Modell und in verschiedenen Grössen erhältlich.

1RHY1717C

43x43x10 cm



ROHO Nexus SPIRIT

Dieses Kissen bietet Sitzbeinen, Steiss- und Kreuzbein Schutz durch das eingepasste ROHO-Trocken-Flotationskissen. Die anatomisch geformte Schaumstoffbasis bietet erhöhte Stabilität bei Transfers vom und auf das Kissen. Dieser Schaumstoff wurde zur Verbesserung der Positionierung des Beckens und der Oberschenkel entworfen, hierdurch wird die Körperhaltung verbessert. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

NS1818C

46x46x10 cm



ROHO Recliner

Sitz- und Rückensystem komplett.
Anfertigung erfolgt nach Rollstuhlmassen und Ihren Wünschen.
1 Ventil- oder 2 Ventiltechnik zur optimalen Anpassung.
Lieferung erfolgt inklusive Überzug und Luftpumpe.

RECLINER

Nach Mass angefertigt



ROHO Matratzensystem

Mattress System unterstützt die Heilung von Druckgeschwüren. Der Patient sinkt in die Einheit ein, diese passt sich den natürlichen Konturen des Körpers an. Das heisst die Matratze passt sich dem Körper an, nicht der Körper der Matratze.

MATRESS1
MATRESS4

1 Teileinheit Grösse 86x49x8.5 cm, ohne Bezug
4 Teileinheiten Grösse 86x196x8.5 cm, ohne Bezug

Alle Kissen inkl. Überzug



ROHO Sitzkissen AirLITE

Erhöhter Schutz und Komfort dank Luftkammern:

- weicher, anschmiegsamer Schaumstoff
- reduzierte vordere Höhe für besseren Transfer
- ausgeprägte Positionierung mit tiefen Beinmulden

Erhöhter Schutz vor „Durchsitzen“

Die ROHO AIR FLOATATION™-Luftkammern, welche unter den Sitzbeinen eingebaut sind, wurden durch Zelle-zu-Zelle Luftzirkulation aufgewertet. Schützt dauerhaft bei langem Sitzen.

Weicherer Schaumstoff, erhöhter Komfort

Insgesamt wurde die Schaumstoffhärte angepasst, wodurch sich das Kissen sanfter den Körperkonturen anschmiegt.

Stabilität mit Komfort kombiniert

Das AirLITE erleichtert Transfers, indem Vorderteil und Mitte des Kissens herabgesetzt wurden, während die Vertiefung der Beinmulden eine starke Positionierung erlaubt. Dies vermittelt ein angenehmes und sicheres Sitzgefühl.

Inkontinenzbezug

Der Bezug mit neuem Design und abgedecktem Reissverschluss ist flüssigkeitsabweisend, wechselbar, 2-Weg elastisch und hat einen rutschfesten Boden. Erhältlich in verschiedenen Grössen.




AL1616HD

40.5x40.5x9.5cm

Stimulite Classic

Mehrere Wabenschichten sorgen für gleichmässige Druckverteilung. Seitliche Verstärkungen geben zusätzlichen Halt und Stabilität. Leichtgewicht, weniger als 1.5 kg schwer. Waschbar in der Maschine, Inkontinenzeinlage (Option). Perforierter Wabenkörper ermöglicht optimale Luftzirkulation und lässt Feuchtigkeit verdunsten. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

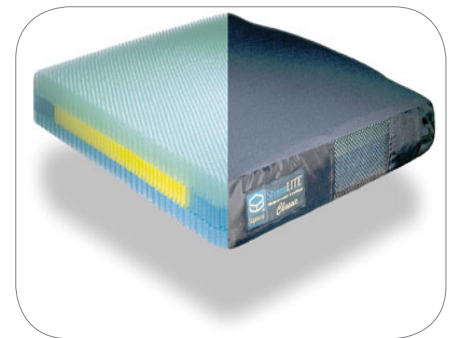

CL1816


45x40 cm (Preis je nach Grösse)

Stimulite Classic XS = Extra Sensitiv

Wie Classic aber mit:

Noch mehr Sitzkomfort durch weichere Streifen an der Oberfläche, für besonders empfindliche Patienten. Feinste Unterteilung mehrerer Wabenschichten zur gleichmässigen Druckverteilung.

Erhältlich in verschiedenen Grössen.

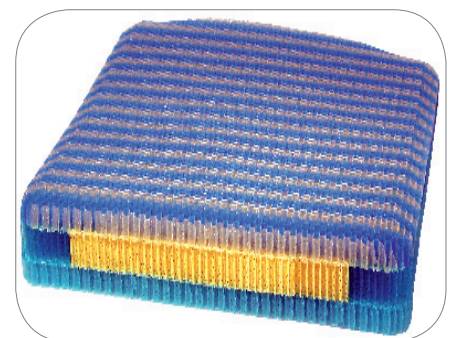

CLXS1818

45x45 cm (Preis je nach Grösse)

Stimulite SlimLINE

Für Personen mit geringerem Dekubitusrisiko. Perforierter Wabenkörper ermöglicht Luftzirkulation und lässt Feuchtigkeit verdunsten. Abduktor- und Adduktorenerhöhung zur Beinführung. Lordosstütze zur komfortablen Rückenentlastung. Kann mit jedem Kissen verwendet werden. Sitzmulde zur Unterstützung der guten Sitzhaltung. Erhältlich in verschiedenen Grössen.



SM1616


40x40 cm (Preis je nach Grösse)

Stimulite Contour

Wartungsfreies Antidekubitus Sitzkissen. Zur Dekubitusprophylaxe und Unterstützung der guten Sitzhaltung. Sitzmulde zur optimalen Hüfthaltung und Rückenstabilisierung. Weichere Areale umschliessen die Sitzknochen und verhindern das Durchsitzen. Abduktor- und Adduktorenerhöhung zur Beinführung. Atmungsaktiver Bezug. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

CD1618

40x45 cm (Preis je nach Grösse)

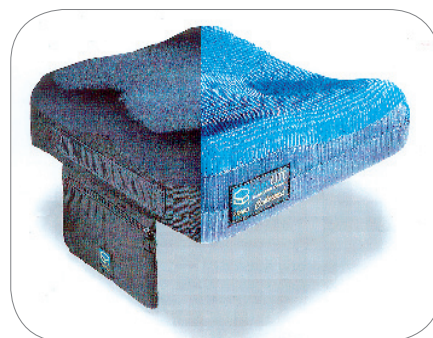

Stimulite Contour XS = Extra Sensitiv

Wie Contour aber mit noch mehr Sitzkomfort durch weichere Streifen an der Oberfläche, für besonders empfindliche Patienten. Feinste Unterteilung mehrerer Wabenschichten zur gleichmässigen Druckverteilung. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

CDXS1618

40x45 cm (Preis je nach Grösse)




Stimulite Sportkissen

Dieses 5 cm dicke Sportkissen ermöglicht durch seine einzigartige Wabenform beste Druckverteilung und höchsten Sitzkomfort. Seine glatte Oberfläche ist ideal für Sportler und aktive Rollstuhlfahrer/Innen. Das Kissen besteht aus verschiedenen weichen Schichten, welche die maximale Seitenstabilität, Schockabsorption und Dekubituschutz garantieren. Die perforierten Wabenkammern sorgen für permanente Luftzirkulation, regulieren den Wärmehaushalt und verhindern somit das Schwitzen. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

SP1816

45x40 cm (gleicher Preis für alle Grössen)

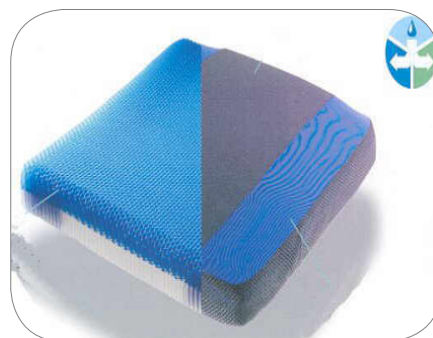

ASKLE ALOVA Galbé

Konturiertes viskoelastisches Schaumstoffkissen für ein stabiles und druckentlastendes Sitzen. Ein viskoelastischer Schaumstoff, der auf Temperaturschwankungen sehr unempfindlich reagiert. Das Einsinken des Körpers in das Kissen ergibt eine vergrösserte Auflagefläche, was den Auflagedruck reduziert. (Druckentlastung) Anatomisch geformt, mit Aussparung im Steissbeinbereich und einem elastischen Inkontinenzüberzug mit rutschfester Unterseite, welcher bis 90° gewaschen werden kann. Erhältlich in verschiedenen Grössen.

VCAG4043-E

40x43 cm (Preis je nach Grösse)

Alle Kissen inkl. Überzug



Varilite Pro Form PSV

Das optimale Kissen für Rollstuhlfahrer mit einem hohen Dekubitus-Risiko und asymmetrischem, anspruchsvollem Positionierungsbedarf. Eine einfach anpassbare Schale erlaubt Positionierung auf individuelle Art und Weise. Auch abgeänderte Schalen bleiben wasserdicht. Ein Aufbau durch Zusatzteile ermöglicht auch asymmetrische Positionierung. Der dreilagige Schaumstoff schützt vor Hautdefekten. PRO FORM PSV Positionierungskissen mit individuell anpassbarem Vakuumschaumstoff für höchste Ansprüche. Erhältlich in verschiedenen Grössen.



70012

50x50 cm

Varilite Solo PSV

Das Kissen zur moderaten Positionierung mit gutem Hautschutz. Für Einfachheit und Schutz im Alltag. Das optimierte Ventil System PSV mit automatischer, dreistufiger Einstellbarkeit. Die verschiedenen Schaumstoffarten federn ab, geben Stabilität und fördern eine aufrechte Körperhaltung. Optimale Durchlüftung verhindert Feuchtigkeit und hält trocken. Das SOLO PSV Kissen für Paraplegiker, Kinder und ältere Personen mit Durchblutungsstörungen – von Therapeuten empfohlen. Erhältlich in verschiedenen Grössen.



62215

30x30 cm

Varilite Stratus

Luft-Schaumstoff Zirkulation kombiniert die besten Eigenschaften von Luft und Schaumstoff. Bei Varilite Luft-Schaumstoffkissen werden verschiedene Schaumstoffe mit unterschiedlichen Raumgewichten verwendet. Dadurch werden verschiedene Zonen des Benutzers individuell unterstützt und entlastet. Durch das Einsinken in das Kissen wird das Gewicht auf die maximale Fläche verteilt und der Druck auf einzelne Stellen minimiert. Erhältlich in verschiedenen Grössen.



50030

50x50 cm

Varilite Zoid PSV

Das ultraleichte Kissen für alle Athleten. Auf dem Court, auf dem Feld, auf der Spur. Das niedrige Profil (5 cm vor Vakuumsitz) entspricht allen internationalen Vorgaben. Guten seitlichen Halt durch integrierten, festen Schaumstoff. Leichtgewichtiger: das breiteste Kissen wiegt weniger als 570 g! Einzigartige Schockabsorption! Mit dem speziellen, schweissmindernden Überzug gibt das ZOID PSV jedem Sportler die ideale Sitzunterlage. Erhältlich in verschiedenen Grössen.



73000112081

30x20 cm

Dynabase Sitzkissen

Das Kissen besteht aus viskoelastischem Schaumstoff, welcher sich dank den thermoaktiven Eigenschaften dem Körper optimal anpasst. Der Schaumstoff unterstützt die gleichmässige Verteilung des Körpergewichts durch eine vergrösserte Auflagefläche, minimiert so den Druck und schützt die Haut. Das offene Zellsystem ermöglicht die Luftzirkulation und fördert somit die Trockenheit auch im Kisseninnern. Erhältlich in verschiedenen Grössen.



Dynashape Sitzkissen

Das neue anatomisch geformte Standardkissen für höhere Ansprüche speziell für leichtgewichtige Patienten. Das viskoelastische, anatomisch geformte Schaumstoffkissen passt sich dank den thermosensiblen Eigenschaften dem Körper optimal an. Die anatomische Form des Kissens verhilft zu einer guten Position der Hüfte und lässt eine leichte Führung der Oberschenkel zu. Der Schaumstoff unterstützt die gleichmässige Verteilung des Körpergewichts durch eine vergrösserte Auflagefläche, minimiert so den Druck und schützt die Haut von Rollstuhlfahrern/-innen mit mittlerem Dekubitus Risiko. Das offene Zellsystem ermöglicht die Luftzirkulation und fördert somit die Trockenheit auch im Kisseninnern. Erhältliche Grössen: 42 x 42 cm und 45 x 45 cm



Jay Basic

Das Sitzkissen aus hochwertigem Schaumstoff mit leichter Konturierung für ein positionierendes Sitzgefühl. In der Grundausstattung mit Inkontinenzbezug. Erhältlich in verschiedenen Grössen. Höhe 5 cm.

JB4440

44x40 cm




Jay Soft Combi P

Die Kissen bestehen im Inneren aus festem Schaumstoff, der anatomisch geformt ist und die korrekte Haltung von Beinen bzw. Rücken stabilisiert. Für den Sitzkomfort sorgt die Umhüllung mit weichem Schaumstoff. Es hat einen Anti-Rutsch-Boden, ist feuchtigkeitsabweisend beschichtet und wird mit einem Inkontinenz-Bezug geliefert. Erhältlich in verschiedenen Grössen. Höhe 6 cm.

JC4440

44x40 cm

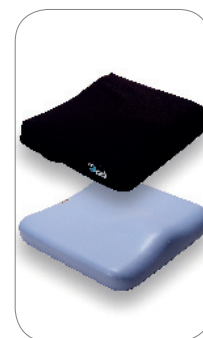

Jay J2

Das Jay J2 Sitzkissen besteht aus einer Basis-Schale aus geformtem, haltbarem geschlossenzelligem Schaumstoff. Sie hält das Becken in der richtigen Position und unterstützt so die korrekte Sitzhaltung. Mit grosser Sitzmulde und genopptem Anti-Rutsch-Boden. Die 3-Kammer Flow-Auflage hält das Fluid unter den Sitzknochen und dem Steissbein.

Erhältlich in verschiedenen Grössen. Höhe 8 cm.



Jay J2 Kontur

Das Kissen zur Prophylaxe bei hohem Dekubitusrisiko. Leichte Hartschaumschale mit Flolite und Weichschaumaufgabe sowie Luftzirkulationsbezug. Höchstmögliche Druckverteilung und geringste Scherkräfte. Optional mit Sitzplatte, die höhen- und neigungswinkelverstellbar angebracht und in den Rollstuhl herausnehmbar eingelegt wird.

Grosses Zubehörprogramm mit Haltungskorrekturmaterail.


Erhältlich in verschiedenen Grössen. Höhe 8 cm.



Jay Sitzplatte

Universell einstellbare Sitzplatte zum Einbau in fast alle Falt-Rollstühle. Durch die einfache Handhabung mit den stabilen Einhängebügeln, lässt sich der Rollstuhl nach wie vor falten und so zum Transport vorbereiten. Die Sitzplatte wird oberseitig mit Velcrobändern ausgerüstet, damit wird das Sitzkissen optimal fixiert.

Erhältlich in 4 Grössen

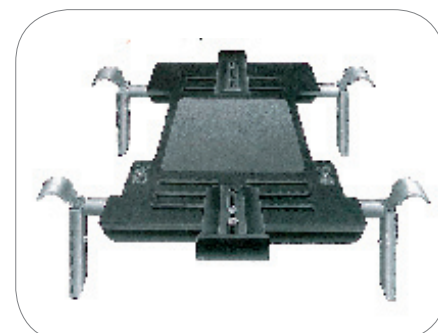

270I
271I
272I
273.1I

38–45 cm Erwachsene
25–28 cm Kinder
29–36 cm Jugendliche
46–55 cm Grosse Erwachsene

Jay J3 Rücken

Komplettes Rückenlehnsenset für Kunden bis 136 kg. Universale 1-Punkte Fixierung für schnelle Montage/ Demontage. Leicht einstell- und anpassbar, auch bei sich verändernden Bedürfnissen. Rücken und Optionen Crash getestet.

Diverse Konturen + Grössen erhältlich.
Preise auf Anfrage.



Tempur Rollstuhlkissen konvex


Entlastet mit bewährtem Tempurschaumstoff und bewirkt eine optimale Druckverteilung. PU-Schutzüberzug für den wirkungsvollen Inkontinenzschutz.

Die Unterseite ist konkav gestaltet um damit die flexible Sitzbespannung eines Rollstuhls zu korrigieren.

Lieferbar in 2 Grössen 40x40 cm – 43x43 cm
Aussen 5 cm hoch, innen 9 cm hoch

127511
128013

40x40 cm
43x43 cm

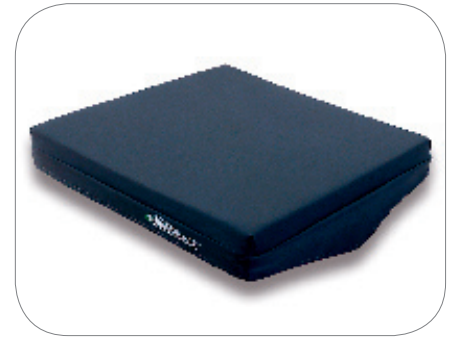

Tempur Rollstuhlkissen

Gleiche Merkmale wie oben jedoch mit einer geraden Unterseite für den Einsatz auf Rollstühlen mit einer festen Sitzfläche. Wirkungsvoller Inkontinenzschutz.

Erhältlich in verschiedenen Grössen.
5 cm oder 7,5 cm hoch

127568
128105

40x40x5 cm
43x43x7,5 cm



Tempur Keilsitzkissen

Entlastet den Rücken auf natürliche Weise. Durch die Form des Kissens wird das Becken nach vorne geschoben und bringt Ihre Wirbelsäule automatisch in die aufrechte Position. Ideal für alle sitzenden Tätigkeiten.
Farbe blau.

124599

40x40x9/1 cm



Keilkissen

Die schräge Sitzfläche des Keilkissens führt automatisch zu einer aufrechten Sitzhaltung. Dies entlastet die Wirbelsäule und die Bandscheiben, vor allem im unteren Rücken. Inklusive waschbarem Überzug.
Farbe blau

0013

35x35x7.5 cm



Helab Contur

Das druckverteilende Sitzkissen Helab Contur ist ein ergonomisches Kissen aus viscoelastischem Schaumstoff. Dieser Schaumstoff passt sich perfekt an die Ergonomie des Benutzers an und garantiert dadurch einen hohen Sitzkomfort und eine stabile Sitzhaltung.

Das «intelligente» Material entwickelt sich bei Nichtbenutzung zu 100% in seine originale Form zurück und kann so jahrelang bei gleichbleibender Qualität benutzt werden.

Der Schaumstoffkern ist mit einer flüssigkeitsabgedichteten Oberfläche ausgestattet, die weder Urin noch andere Flüssigkeiten durchlässt und sich mit warmem Seifenwasser einfach reinigen lässt. Der sehr angenehme, atmungsaktive Kissenbezug ist mit einem Reissverschluss versehen und damit auch gut waschbar.



514545-11

45x45x5 cm
(weitere Masse erhältlich auf Anfrage)

Vicair Academy Adjuster

Das Fünf-Kammer Sitzkissen Academy Adjuster ist speziell zur Anpassung an Körperassymetrien gestaltet.

Die 6-Zentimeter-Ausführung eignet sich besonders gut für Hemiplegiker, die 10-Zentimeter-Ausführung kann optimal bei Amputationen oder starken Deformationen angepasst werden.



AAD10/5045
AAD6/4545

Masse
50x45x10cm (weitere Masse möglich)
45x45x6cm (weitere Masse möglich)

Vicair Butterfly

Das Academy Butterfly Rückenkissen kann mit jeder Rückenlehne kombiniert werden, um die Form der Rückenlehne und die Seitenstabilität zu verbessern. Die drei Kammern beeinflussen entsprechend der Anpassung die Balance, die Rumpfstabilität und die Druckverteilung.



Größen + Preis auf Anfrage.



Tempur Sitzkissen

Verteilt Ihr Gewicht gleichmässig über die gesamte Sitzfläche und ermöglicht es Ihnen, auch für längere Zeit bequem zu sitzen. Farbe blau.

134997
131000

40x42x5 cm
Small 35x35x4 cm



Tempur Rückenkissen Transit

Das handliche Lordosekissen für unterwegs oder zu Hause. Leicht zu tragen und zu Positionieren. Einfach in der gewünschten Höhe zwischen Rücken und Rückenlehne schieben. Farbe blau.

137299

30x25x6/1 cm



Lordosekissen

Einfach zu handhabendes Lordosekissen für den Einsatz im Rollstuhl. 2 Klettbander zur Fixation am Rückenrohr.

150J
151JA
151J

Für Erwachsene, mit Klettband
Für Erwachsene, mit Elastikband
Für Jugendliche, mit Elastikband



Orgaterrm Rollstuhl Schaffell

Eckig geschnittenes Schaffell für den Rollstuhl. Mit Bändern zur Befestigung versehen.

RE4040
RE4090

Grösse 42x42 cm
Grösse 42x92 cm





Bodypoint Beckenpositionierung (2-Punkt Gurt)

1. Center Pull: Länge einseitig verstellbar
2. Dual Pull: Länge zweiseitig verstellbar (durch Zug nach aussen)
3. Rear Pull: Länge zweiseitig verstellbar (durch Zug nach innen)



Erhältliche Grössen: XS - L (ausser Rear Pull: XS - M)


Nicht jeder Schnallentyp für alle Gurte erhältlich.



Bodypoint Beckenpositionierungsgurt (4-Punkt-Gurt)


Erhältliche Grössen: XS - L (ausser Rear Pull: XS - M)

Nicht jeder Schnallentyp für alle Gurte erhältlich.

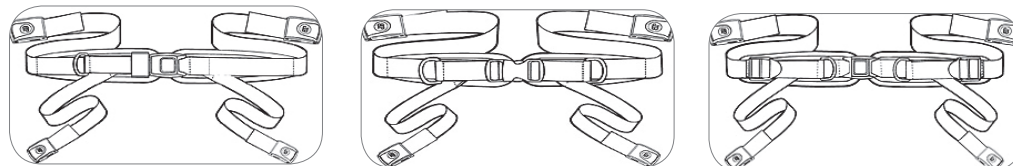

Erhältliche Schnallen:

1. Side Release
2. Push Button
3. Rehab

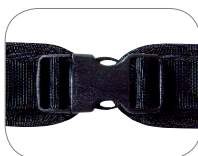

Sicherheitskappen für Gurtschnallen, verhindern das versehentliche Öffnen der Schnalle. Geeignet für Push Button Schnallen.

Lochdurchmesser 14 mm

Lochdurchmesser 6 mm

Lochdurchmesser 6 mm für XS Gurte mit der Extra Small Metal Push-Button Schnalle (SMPB)



Weitere Informationen auf Anfrage.



Oberkörperpositionierung Schultergurt PivotFit (dynamisch)

(vor- und rückseitig anpassbar)

Die perfekt angepasste Form des PivotFit Schultergurtsystems bietet eine optimale Unterstützung und eine komfortable Passform. Die geschwungenen Polster passen sich optimal den Konturen der Schultern und des Brustkorbes an und die neue Schnalle sorgt für eine einfache Bedienung.

Weitere Eigenschaften:

- einfach anzuziehen, auch über voluminöse Pullover und Jacken
- 25% bessere Druckverteilung als bei einem herkömmlichen Schultergurt



Vorderseitig anpassbar

Die vorderseitige Befestigung bietet eine maximale Stabilität und ermöglicht es der betreuenden Person, das Gurtsystem dem Benutzer zugewandt oder von hinten einzustellen.



Rückseitig anpassbar

Die rückseitig anpassbare Befestigung ermöglicht es der betreuenden Person das Gurtsystem von hinten einzustellen und hält die Schnalle vom Benutzer fern. Auch ideal für dickere/tiefere Rückenlehnen.

In den Grössen XXS - XL erhältlich.

Schulterbreite 210 - 240 mm = Gr. XXS

Schulterbreite 240 - 280 mm = Gr. XS

Schulterbreite 280 - 330 mm = Gr. S

Schulterbreite 330 - 410 mm = Gr. M

Schulterbreite 410 - 480 mm = Gr. L

Schulterbreite 480 - 560 mm = Gr. XXL



Oberkörperpositionierung Schultergurt Trimline

(vor- und rückseitig anpassbar)

Der Trimline Schultergurt bietet freie Atmung bei Stabilisierung der Schultern und des Oberkörpers. Aktivere Benutzer haben mit dem Trimline-Schultergurt auch die Möglichkeit der Crossover-Montage für eine komfortable Anpassung bei maximaler Stabilität. Diese Montage-Variante bietet Frauen eine gute und schlichte Passform.




Vorderseitig anpassbar

Die vorderseitige Befestigung bietet eine maximale Stabilität und ermöglicht es der betreuenden Person, das Gurtsystem dem Benutzer zugewandt oder von hinten einzustellen.



Rückseitig anpassbar

Die rückseitig anpassbare Befestigung ermöglicht es der betreuenden Person das Gurtsystem von hinten einzustellen und hält die Schnalle vom Benutzer fern. Auch ideal für dickere/tiefere Rückenlehnen.

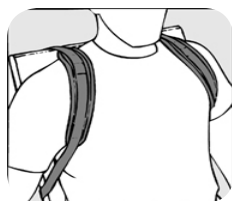

Normale Position



Crossover Position

In den Größen M + L erhältlich.

Schulterbreite 330 - 410 mm = Gr. M

Schulterbreite 410 - 480 mm = Gr. L

Positionierungsgurt mit Gurtpolster

Neues Konzept zur Beckenpositionierung mit Hilfe der Sub-ASIS (Anterior Superior Iliac Spine) Polster. Die Polster werden an der Innenseite des Gurtes an einem Velcroband befestigt. Dies ermöglicht eine individuelle Platzierung der Polster.

- Die anatomisch geformten Sub-ASIS Polster erlauben eine stabile und gleichzeitig komfortable Positionierung
- Durch die Polster wird der Druck auf Bauch und Blase deutlich verringert
- Gleichzeitig bieten die Polster eine höhere Bewegungsfreiheit für den Oberkörper



Monoflex Dynamischer Positionierungsgurt

Bietet Flexibilität und Stabilität. Einfache und schnelle Montage. Mit Dreh-Schnalle. Länge beidseitig verstellbar.

In den Grössen XS - XL erhältlich.



Beingurt zur Beckenpositionierung

Professionelle Positionierung. Durch die Polsterung der Oberschenkelgurte ist ein optimaler Komfort gewährleistet. Sehr dauerhafte, nahtlose Polster, auch für empfindliche Personen. Länge stufenlos einstellbar. Mit bewährter Side Release Schnalle.

In den Grössen S - L erhältlich.



Elastisches Universalband aus Neopren

Zur Fixierung des Oberkörpers, wie auch der Oberschenkel oder Waden einsetzbar. Eignet sich als Positionierungshilfe für Therapeuten und Benutzer. Leicht anzubringen und vielseitig anwendbar. Verstärkte Daumenschleife ermöglicht eine einfache Handhabung.

In den Grössen S, L + XL erhältlich.



Fussfixation zu Montage auf Rollstuhl-Fussplatte

Zur Unterstützung einer stabilen und komfortablen Sitzposition. Als Ausgleich für die Bewegung des Kopfes und des Oberkörpers halten Fussfixationen den Unterkörper im Gleichgewicht. Unterstützt eine stabile und komfortable Sitzposition. Bewegungsfreiheit der Füsse bleibt erhalten. Weiche ergonomisch geformte Polster. Entlastung der Fussgelenke. Einfache Anpassung und Montage direkt auf den Fussplatten.

Fussfixation, Paar, inkl. Montageset

Grösse S Fesselumfang 140–191 mm (Paar)

Grösse M Fesselumfang 152–229 mm (Paar)

Grösse L Fesselumfang 191–267 mm (Paar)

Grösse XL Fesselumfang 254–330 mm (Paar)

FT210S

FT210M

FT210L

FT210XL



Ristband zur Fussfixation

Ristband zur leichten Fussfixation, verhindert das Rutschen nach vorne oder hinten der Füsse. Wird in die Fussplatte eingeschlaufft.

FT221

Montageset für individuelle Anpassung der Fussfixation



Otto Bock Foot Caps

Die Foot Caps Fixiersandalen von Otto Bock sorgen für mehr Stabilität und Sicherheit. Sie sind einfach anzubringen und eignen sich für alle Otto Bock Rollstühle und Untergestelle. Ihre in der Länge verstellbaren Klettverschlussgurte lassen sich optimal an die gewünschte Grösse anpassen. Die Anti-Rutsch-Beschichtung bietet optimalen Halt und Festigkeit und die schützende Rückwand hält den Fuss den ganzen Tag über in der richtigen Position.

476B52=SK010


Grösse S, 190x89mm

476B52=SK015

Grösse M, 230x114mm

476B52=SK020

Grösse L, 250x140mm

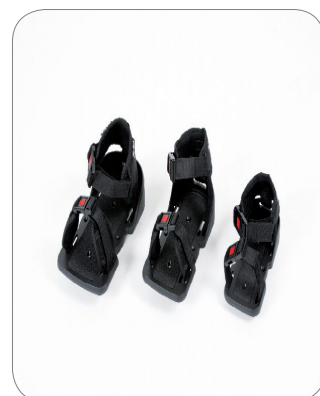

5511-1

Armlehnenpolster nach Mass

Die Basis bildet einen Holzkern, aufgepolstert mit Schaumstoff und Überzug aus Kunstleder oder Echtleder. Form und Ausführung nach Mass. Abbildung zeigt ein Armlehnenpolster mit seitlicher Unterarmführung.



Hemitisch abklappbar

Anatomischer Armauflagetisch aus Polycarbonat, transparent, aufschiebbar auf das Armlehnenpolster.

30366

Polycarbonattisch rechts

30365


Polycarbonattisch links

30374

Polycarbonattisch rechts mit erhöhtem Rand

30373

Polycarbonattisch links mit erhöhtem Rand

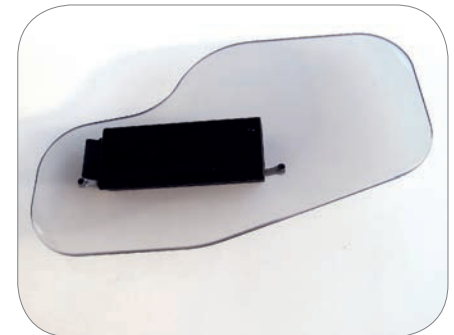

HABA2-POLY

Arbeitsplatte HABA

Rollstuhl-Arbeitsplatte aus Polycarbonat
Befestigung durch von Hand verdrehbare Excenter.
Anpassbar an alle Rollstuhltypen.



5510-1

Arbeitsplatten Polycarbonat transparent

Platte aus PC für Sitzbreite 40 – 45 cm,
Inkl. Bogenrohr und Montagematerial.

5510-2

Platte aus PC für Sitzbreite 48 – 52 cm,
Inkl. Bogenrohr und Montagematerial.

5510-3

Platte aus PC für Sitzbreite 40 – 52 cm, (gewünschtes Mass
angeben) inkl. doppeltem Bogenrohr und Montagematerial.

5510-4

Platte aus PC nach Mass.
Inkl. doppeltem Bogenrohr und Montagematerial.

5510-5

Platte aus PC für Sitzbreite 40 – 45 cm
Bauchausschnitt konisch ② auslaufend.
Inkl. Bogenrohr und Montagematerial.

5510-6

Platte nach Mass aus Polycarbonat ohne
Bogenrohr und Montagematerial.
Nach Wunsch entweder gerade ① oder konisch auslaufend ②



5509

Sicherheitsgurte

zu Arbeitsplatte aus Polycarbonat. Sicherheitsgurte mit
Schnappverschluss. Zur Befestigung der Arbeitsplatte.



Kopfstütze NUTEC (Otto Bock)

Die dynamischen NUTEC-Kopfstützen überzeugen durch ihr intelligentes und durchdachtes System. Sie verfügen über verschiedene Pads, lassen sich der Kopfform individuell anpassen, weichen dem Druck des Kopfes aus und unterstützen somit eine funktionale Kopfhaltung. Zudem kann durch eine weiche, mittlere oder harte Federung der gewünschte Härtegrad ausgewählt werden. Die innovative, abklappbare Kopfstütze ist selbstverständlich mit allen gängigen Kopfstützenpolstern kombinierbar.

Auf Anfrage



Kopf- und Nackenpositionierungssystem

Die richtige Positionierung des Kopfes ist meistens eine grosse Herausforderung. ULTRA wurde entwickelt, um genau dies präzise, aktiv und kontrolliert zu gewährleisten sowie auch therapeutische Ziele zu erreichen.

Bietet folgende Vorteile:

- Verschiedene individuelle und präzise Anpassungen um den Patienten ein besseres Blickfeld zu ermöglichen.
- Die Form der Kopfstütze bringt Sicherheit und Komfort für den Benutzer.
- Maximale Unterstützung um spezifische Bedürfnisse abzudecken, auch nach vorne und hinten.



Pelotte Bodypoint

Abklappbare Universalpelotte zur Montage an Rückenlehnenrohr. Angenehme Polsterung. Die Pelotten in verschiedenen Grössen erhältlich. Oberfläche Kunstleder oder Neopren. Abgebildet mit flachem Montagehalter, auch mit Klammersystem für Rückenrohrmontage erhältlich.

Viele Varianten lieferbar, bitte anfragen.



Joystick in verschiedenen Formen

Ein individueller Joystick ist für ein ermüdungsfreies Handling des Elektrorollstuhls oft die beste Lösung. Passend auf die meisten Fahrpulte.


PC101A	Tetragabel U-Form Breite 76 mm zu Schaft Ø 4,8 mm ②
PC101B	Tetragabel U-Form Breite 76 mm zu Schaft Ø 6,4 mm ②
PC102A	Tetragabel U-Form Breite 102 mm zu Schaft Ø 4,8 mm ②
PC102B	Tetragabel U-Form Breite 102 mm zu Schaft Ø 6,4 mm ②
PC107A	Dom Ø 66 mm zu Schaft Ø 4,8 mm ③
PC107B	Dom Ø 66 mm zu Schaft Ø 6,4 mm ③
PC103A	Kugel Ø 44 mm Höhe 76 mm zu Schaft Ø 4,8 mm ④
PC103B	Kugel Ø 44 mm Höhe 76 mm zu Schaft Ø 6,4 mm ④
PC108AS	Pilz Ø 35 mm Höhe 51 mm zu Schaft Ø 4,8 mm ⑤
PC108BS	Pilz Ø 35 mm Höhe 51 mm zu Schaft Ø 6,4 mm ⑤
PC108AL	Pilz Ø 41 mm Höhe 51 mm zu Schaft Ø 4,8 mm ⑤
PC108BL	Pilz Ø 41 mm Höhe 51 mm zu Schaft Ø 6,4 mm ⑤
PC104A	Stift Ø 13 mm Höhe 152 mm zu Schaft Ø 4,8 mm ⑥
PC104B	Stift Ø 13 mm Höhe 152 mm zu Schaft Ø 6,4 mm ⑥



Taster für Fahrpulte

Wenn bei reduzierter motorischer Fähigkeit die kleinen Originaltaster der Fahrpulte nicht mehr bedient werden können, bieten sich diese grossen Tasten an. Anschliessbar an verschiedene Fahrpulte. Verschiedene Grössen und Farben erhältlich. Die Taster werden direkt auf die Tischplatte, in die Nähe der Finger gelegt oder an der Kopfstütze befestigt, damit der Benutzer diese mit dem Kopf oder Kinn antippen kann.

Für Sondersteuerungen an Elektrorollstühlen fragen Sie uns bitte an.

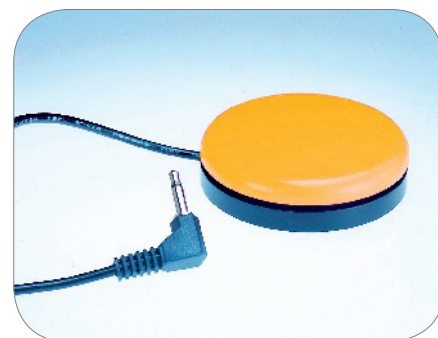

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MWST
0013	Keilkissen inkl. Überzug 35 x 35 x 7.5 cm	47.80
124599	TEMPUR Keilkissen comfort 40x40x9/1cm inkl. Jersey- Überzug, blau	138.35
127511	TEMPUR Sitzkissen konvex, 40x40x9/5cm, inkl. Jersey-Überzug, blau	267.40
127568	TEMPUR Sitzkissen 40x40x5cm, inkl. Jersey-Überzug, blau	239.55
128013	TEMPUR Sitzkissen konvex, 43x43x9/5cm, inkl. Jersey-Überzug, blau	267.40
128105	TEMPUR Sitzkissen 43x43x7.5cm, inkl. Jersey-Überzug, blau	248.85
131000	TEMPUR Sitzkissen 35x35x4cm, inkl. Jersey-Überzug, blau	91.00
134997	TEMPUR Sitzkissen 40x42x5cm, inkl. Jersey-Überzug, blau	134.65
137299	TEMPUR Rückenkissen Transit 30x25x6/1cm, inkl. Jersey- Überzug, blau	78.95
1R1111C	Sitzkissen Roho Profil-10/1 Vent 52x52x10cm, inkl. Überzug	676.90
1R1111LPC	Sitzkissen Roho Profil-5/1 Vent 52x52x5cm, inkl. Überzug	676.90
1RHY1717C	ROHO-Kissen Hybrid Elite 1-Ventil	708.45
270I	Sitzplatte fest, Erwachsene verstellbar	370.00
271I	Sitzplatte fest, Kinder verstellbar	370.00
272I	Sitzplatte fest, Jugendliche verstellbar	370.00
273.1I	Sitzplatte fest, für grosse Erwachsene, verstellbar	370.00
30365	Hemitisch, flip, links, anatomisch, Polycarbonat	305.00
30366	Hemitisch, flip, rechts, anatomisch, Polycarbonat	335.00
30373	Hemitisch, flip, links, mit erhöhtem Rand, anatomisch, Polycarbonat	360.00
30374	Hemitisch, flip, rechts, mit erhöhtem Rand, anatomisch, Polycarbonat	360.00
476B52=SK0	Fixiersandalen (Foot Caps)	208.95
50030	Sitzkissen Varilite Stratus 50x50cm, inkl. Überzug	400.20
514545-11	Sitzkissen Helab Contur 45x45x5cm	193.00
5509	Sicherheitsgurt zu Polycarbonat Arbeitsplatte	21.50
5510-1	Arbeitsplatte Polycarbonat mit Montagemat. und Bogenrohr	571.00
5510-2	Arbeitsplatte Polycarbonat Masszuschnitt mit Bogenrohr und Montagematerial	644.50
5510-3	Arbeitsplatte Polycarbonat, 2 Trägerrohren und 2 Halterohren	615.00
5510-4	Arbeitsplatte Polycarbonat Masszuschnitt, 2 Trägerrohre und 2 Halterohre	714.00
5510-5	Arbeitsplatte Polycarbonat Ausschnitt konisch zulaufend mit Bogenrohr usw.	490.00
5510-6	Arbeitsplatte Polycarbonat ohne Montagematerial	307.00
5511-1	Armlehnenpolster nach Mass	180.00
62215	Sitzkissen Varilite Solo PSV 30x30cm, inkl. Überzug	649.00
70012	Sitzkissen Varilite Pro Form PSV 50x50cm, inkl. Überzug	896.95
73000112081	Sitzkissen Varilite Zoid PSV 30x20cm, inkl. Überzug	701.00
AAD10/5045	Sitzkissen Vicair Adjuster 50x45x10 cm	835.00
AAD6/4545	Sitzkissen Vicair Adjuster 45x45x6cm	835.00
AL1616HD	Sitzkissen ROHO AirLite SB 40.5 x 40.5 x 9.5cm	184.80
CD1618	Sitzkissen Stimulite Contour 40 x 45 cm	905.00
CDXS1618	Stimulite Contour extra sensitive SB 40 x 45 cm	905.00
CL1816	Sitzkissen Stimulite Classic SB45 x 40cm	880.00
CLXS1818	Stimulite Classic extra sensitive SB 45 x 45 cm	880.00
CM103XS	Beckengurt gepolstert Gr. XS, mit Schnalle SR 4-Punkte Gurt	149.00
CS1111C	Sitzkissen Roho Contur Select 52x52cm, inkl. Überzug	756.75
FT210L	Fussfixation Grösse L, Paar	204.00
FT210M	Fussfixation Grösse M, Paar	204.00
FT210S	Fussfixation Grösse S, Paar	204.00
FT210XL	Fussfixation Grösse XL, Paar	230.00
FT221	Ristband zu Fussfixation	24.00
HABA2-POLY	Arbeitsplatte f. Rollstühle Polycarbonat m. exzentrisch verstellb. Haltern	384.00
JAY150J	Lordosekissen für Erwachsene, mit Klettband	90.00
JAY151J	Lordosekissen f. Jugendliche, mit Klettband	90.00
JB4440	Sitzkissen Jay Basic SB 44 x 40 cm	140.00
JC4440	Sitzkissen Jay Soft Combi P SB 44 x 40 cm	270.00
MATRESS1	Matratze, Roho 1 Teileinheit 50x86x8cm, ohne Überzug	621.15
MATRESS4	Matratze, Roho 4 Teileinheiten 200x86x8cm, ohne Überzug	2'223.75
NS1818C	ROHO-Kissen NEXUS Spirit	507.90
PC101A	Joystick, Tetragabel U-Form B 76mm, d 4.8mm	67.00
PC101B	Joystick, Tetragabel U-Form B 76mm, d 6.4mm	67.00
PC102A	Joystick, Tetragabel U-Form B 102mm, d 4.8mm	67.00
PC102B	Joystick, Tetragabel U-Form B 102mm, d 6.4mm	67.00
PC103A	Joystick, Kugel H 76mm, d 4.8mm	67.00
PC103B	Joystick, Kugel H 76mm, d 6.4 mm	67.00
PC104A	Joystick, Stift, d 13mm, H 152mm, zu Schaft d 4.8mm	54.00

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis exkl. MWST
PC104B	Joystick, Stift, d 13mm, H 152mm, zu Schaft d 6.4mm	54.00
PC107A	Joystick, Dom d 66mm, zu Schaft d 4.8mm	84.00
PC107B	Joystick, Dom d 66mm, zu Schaft d 6.4mm	84.00
PC108AL	Joystick Pilz, d 41mm, H 51mm, zu Schaft d 4.8mm	84.00
PC108AS	Joystick Pilz, d 35mm, H 51mm, zu Schaft d 4.8mm	84.00
PC108BL	Joystick Pilz, d 41mm, H 51mm, zu Schaft d 6.4mm	84.00
PC108BS	Joystick Pilz, d 35mm, H 51mm, zu Schaft d 6.4mm	84.00
QS1211C	Sitzkissen Roho Quadro Select, 56x52x10cm, inkl. Überzug	756.75
RE4040	Rollstuhleinlage Echtfell mit Lederbündel 42x42cm	65.00
RE4090	Rollstuhl-Einlage echt Lammfell 42x90cm	125.00
RECLINER	Sitz-und Rückensystem Roho Anfertigung nach Mass	1'221.00
SM1616	Stimulite Slimline SB 40 x 40 cm	860.00
SP1816	Stimulite Sportkissen SB 45 x 40cm	642.00
SU100	Kopfstütze Stealth ULTRA	870.00
VCAG4043-E	Sitzkissen Alova Galbé SB 40 x 43 cm	149.00