


Neu im Sortiment

Mercury Advance SMARTcare

Eine innovative Lösung zur Prävention und Behandlung von Dekubitus. Es bietet eine effektive Doppeltherapie auf einer einzigartigen Oberfläche durch Kombination von klinisch erprobten Hybrid-Oberflächen, welche bis jetzt nur separat erhältlich waren.

Der äussere dampfdurchlässige Multi-Stretch Dartex Überzug vereinigt Hochfrequenz Geschweisste Nähte und eine schützende Reissverschlussabdeckung entsprechend den striktesten Infektionsrichtlinien

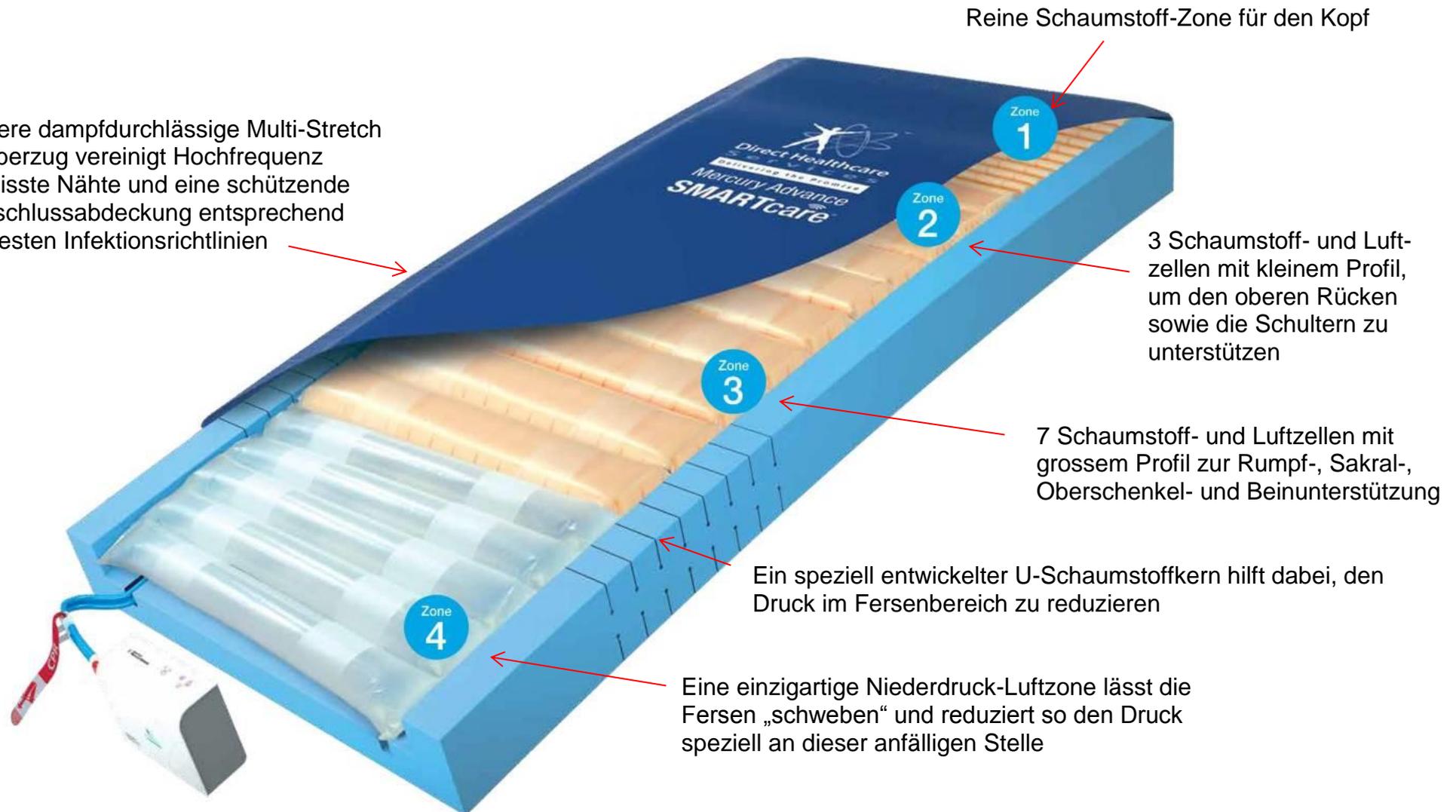


Erhältlich mit oder ohne Pumpe (Motor). Je nach Gesundheitszustand (Beweglichkeit) des Benutzers

Einfache CPR Entlüftungslasche



Mit Hilfe des hoch qualitativen CME-Schaumstoffes umhüllt von Luftzellen ist es möglich, im elektrischen Betrieb einen Wechseldruck und somit eine Entlastung zu schaffen

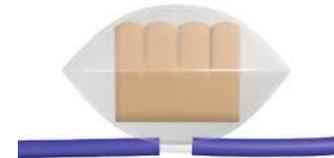

Bei Verwendung im nicht elektrischen Modus sorgt die fortgeschrittene klinisch erwiesene Luftverdrängungs-Technologie kontinuierlich für eine Druckentlastung, welche durch das Eigengewicht des Patienten und dessen Bewegung entsteht.

Bei Verwendung im elektrischen Modus bietet Mercury Advance SMARTcare eine Druckentlastung durch mehrere verbundene alternierende Schaum- und Luftzellen. Ohne Einfluss eines Schaumstoffes als Oberschicht versichert die einzigartige „Schaumstoff in Luftzellen“ Technologie eine effektive Druckentlastung.

Technische Daten:

Risikokategorie: Klinische Anwendung, Dekubitus Grad 4

Gewichtsbeschränkungen: Kein Mindestgewicht, Produkt ausgelegt für 254 kg

Grösse: Standard 88 x 198 x 15 cm (BxLxH)

Produktgewicht: 13.3 kg Matratze, 1.7 kg Pumpe

Zykluszeit: 10 Minuten, 2 in 1 alternierender Zyklus, Wahl zwischen LO oder HI Einstellung

Stromspannung: 220 V – 240 V / 50HZ

Leistungsbedarf: 10W