

Q400[®] SERIE

Fortschrittliche Leistung im Innen- & Aussenbereich



Q Serie
Elektrorollstühle

Fortschrittliche Technik, für Sie massgeschneidert.



Q400 R



Q400 M



Q400 F

FORTSCHRITTLICHE TECHNIK. MASSGESCHNEIDERT FÜR SIE.

QUICKIE®, SEDEO®, JAY® und WHITMYER® liefern die umfassendste Auswahl an innovativen und technisch fortgeschrittenen Elektrorollstühlen und Zubehör. Hierdurch kann jeder Elektrorollstuhl individuell auf die klinischen Bedürfnisse und den persönlichen Lebensstil des Nutzers angepasst werden.



THE POWER OF QUICKIE

Von einfacher bis zu komplexer Versorgung. Eine grosse Auswahl an Antriebsarten (Front-, Heck- und Mittelradantrieb), Sitzsystemen, Sondersteuerungen und Zubehör, kann zu dem perfekten Elektrorollstuhl für alle individuellen Bedürfnisse kombiniert werden.

KLINISCHE ANFORDERUNGEN



Q200

SITZSYSTEM
SLING SEAT

ANTRIEBSART
R



Q400

SITZSYSTEM
SEDEO LITE

ANTRIEBSART
M
F
R



Q500

SITZSYSTEM
SEDEO PRO

ANTRIEBSART
M
F
R



Q700

SITZSYSTEM
SEDEO ERGO

ANTRIEBSART
M
F
R

SEDEO PRO

M
F
R



Q700-UP

SITZSYSTEM
SEDEO ERGO UP

ANTRIEBSART
M
F

□ R: Heckantrieb □ M: Mittelradantrieb □ F: Frontantrieb

FAHREIGENSCHAFTEN

ÜBERBLICK

ÜBERBLICK Q400 SERIE

Mit drei Antriebsarten, dem hochgradig anpassbaren SEDEO LITE Sitzsystem, den Positionierungsoptionen (JAY und WHITMYER) sowie einer Vielzahl von Bedienelementen können Sie Ihren Q400 individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.



**Q400 MIT
SEDEO LITE**
FRONTANTRIEB



**Q400 MIT
SEDEO LITE**
MITTELRADANTRIEB



**Q400 MIT
SEDEO LITE**
HECKANTRIEB



FORTSCHRITTLICHE LEISTUNG IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Der neue QUICKIE Q400 bietet Ihnen eine erstklassige Leistung im Aussenbereich und eine hervorragende Manövrierfähigkeit in Innenräumen. All dies in Kombination mit dem hochgradig einstellbaren SEDEO LITE Sitz- und Rückenkissen für leichte bis mittelschwere, klinische Bedürfnisse.


ANTRIEBSARTEN

Q400 M: Mittelradantrieb

Q400 R: Heckantrieb

Q400 F: Frontantrieb

SITZSYSTEM

SEDEO LITE

POSITIONIERUNGSOPTIONEN

JAY & WHITMYER

STEUERUNGEN

VR2 Steuerungen


DESIGN

INDIVIDUELLER STIL &

Akzentfarben

Individualisieren Sie Ihren Q400!

Geben Sie Ihrem QUICKIE Q400 Elektrorollstuhl eine persönliche Note; Mit der Auswahl Ihres bevorzugten Farbakzents können Sie die markante Mattschwarze Antriebseinheit perfekt ergänzen. Ihren Elektrorollstuhl individuell zu gestalten war nie so einfach.

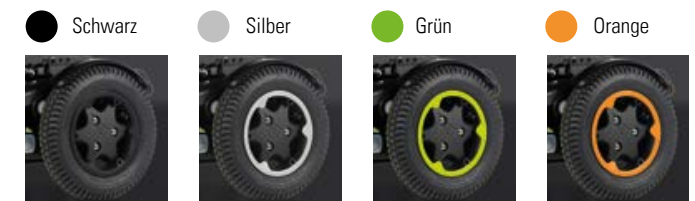

ANTRIEB WÄHLEN

FRONT-, HECK- ODER MITTELRADANTRIEB

	Q400 R	Q400 M	Q400 F
Antriebsart	Heckantrieb	Mittelradantrieb	Frontantrieb
Wendekreis	950 mm	560-630 mm	735 mm
Antriebsräder	13"	13"	13"
Lenkräder	9"	7"	9"
Max. Geschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Batterie	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah	50 Ah, 60 Ah, 80 Ah
Max. Wendekreis	1258 mm	1100 mm	1240 mm
Max. Steigfähigkeit	10°	8°	8°
Max. Kantensteigfähigkeit	80 mm / 100 mm*	100 mm	70 mm
Farbakzente	4	4	4
Max. Reichweite (ISO 7176-4)	35 km	35 km	35 km
Sitzhöhe	415 mm mit Sitzneigung (mit 60 Ah Batterien)		

*Nur mit Bordsteinheber

Die Auswahl der Antriebseinheit beeinflusst das Fahrverhalten des Elektrorollstuhls in unterschiedlichen Situationen und Umgebungen. Somit kann je nach klinischen oder persönlichen Bedürfnissen, Lebensstil oder von der Umgebung abhängigen Ansprüchen der ideale Wegbegleiter konfiguriert werden.

Q400 R HECKANTRIEB

Der Heckantrieb ist die klassische Antriebsart und überzeugt durch exzellente Fahreigenschaften auch bei hohen Geschwindigkeiten, sowie seiner hervorragenden Kantensteigfähigkeit.



Jede Q400 Antriebsart bietet herausragende Leistung auch im Freien durch Kombination der zuverlässigen 2-Pol Motoren, Federung der Antriebsräder für grossartigen Komfort und Traktion, Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h und Batterien von bis zu 80 Ah.

Q400 M **MITTELRADANTRIEB**

Der Mittelradantrieb bietet unübertroffene Wendigkeit mit einer kleineren Grundfläche als Heck- oder Frontantrieb. Er hat den kompaktesten Wendekreis und ist extrem intuitiv zu fahren und zu steuern.



Q400 F **FRONTANTRIEB**

Die kompakten Abmasse und der Schwerpunkt zwischen Antriebsachse und Lenkrad sind die Vorzüge dieses Modells. Dank der grossen Antriebsräder sind Kanten von bis zu 100 mm leicht zu überwinden.



Q400 M

MITTELRADANTRIEB

Die QUICKIE Q400 M Antriebseinheit bietet eine hervorragende Manövrierfähigkeit im Aussenbereich mit erstklassiger Leistung in Innenräumen. Kraftvolle Motoren in Kombination mit der 6-fachen Einzelradfederung und der QUICKIE Anti-Pitch-Technologie sorgen für ein komfortables und sicheres Fahrerlebnis.

AUSGEZEICHNETE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank den kompakten Abmessungen und dem geringen Wenderadius passt der Q400 M problemlos durch schmale Türöffnungen, in Aufzüge und ist auch in engen Räumen sehr leicht zu manövrieren. Die niedrige Sitzhöhe von 415 mm (425 mm mit Sitzlift & Sitzneigung) ermöglicht einfache Transfers, das Heranfahren an Tische und erleichtert den Zugang zu rollstuhlgerichten Fahrzeugen.



Q400 F

FRONTANTRIEB

Der Q400 Frontantrieb mit nach innen gekröpften Lenkradarmen ist reaktionsschnell und bietet somit optimale Eigenschaften für das Fahren im Innenbereich.

Sowohl der Q400 F als auch der Q400 R bieten mit ihrer niedrigen Sitzhöhe von 415 mm (425 mm mit Sitzlift & Sitzneigung) einen guten Zugang zu rollstuhlgerecht umgerüsteten Fahrzeugen und ermöglichen ein nahes Heranfahren an Gegenstände, wie z. B. Tische.

Q400 R

HECKANTRIEB

Der Q400 Heckantrieb ist durch die Position des Antriebsrads sehr leicht zu bedienen. Mit dem Bordsteinheber kann er Kanten von bis zu 100 mm erklimmen.

ANTRIEBSARTEN




SEDEO LITE

Das SEDEO LITE Sitzsystem bietet Komfort und hohe Unabhängigkeit im Alltag. Der vielfältig einstellbare Sitzrahmen beinhaltet eine seitliche Sitzschiene für die Montage von zusätzlichen Unterstützungs- und Positionierungsoptionen. Geringe bis mittlere klinische Bedürfnisse können mit SEDEO LITE abgedeckt werden.

SCHNELL & EINFACH ANPASSBAR

Das SEDEO LITE Sitzsystem kann mit Hilfe der selbsterklärenden Kalibrierungsmarkierungen und mit nur einem Werkzeug schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

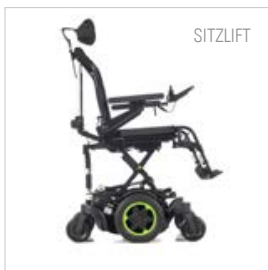

HOCHGRADIG ANPASSBARES SITZSYSTEM



ANPASSRÜCKEN MIT OPTIONALEN KOMFORTKISSEN

SEDEO LITE bietet einen Rücken mit anpassbaren Velcrobändern und eine Reihe von optionalen Sitz- und Rückenkissen. Die breite Palette von JAY-Kissen und -Rücken sind mit dem SEDEO LITE-Sitzsystem kompatibel. Dadurch können auch höhere, klinische Anforderungen erfüllt und die bestmögliche Sitzversorgung sichergestellt werden.

HOCHKLAPPBARE ARMLEHNEN

Die einfach zu bedienenden, hochklappbaren Armlehnen bieten freien Raum für Transfers. Sie können zwischen einer abnehmbaren und einer mitlaufenden Variante wählen. Alle Armlehnen sind mit den verfügbaren Armpolstern kombinierbar.

FUSSRASTE

Die Fussraste ist als zentralmontierte und als abschwenkbare Version erhältlich. Sie können zwischen einem 70° abschwenkbaren sowie einem manuell hochschwenkbaren Fussrastenhalter wählen.

INTEGRIERTE KOPFSTÜTZENHALTERUNG

Die integrierte Kopfstützenhalterung bietet ein neues Mass an Funktionalität, Komfort und Design. Kompatibel mit JAY und WHITMYER Kopfstützen.

TECHNISCHE DATEN / Q400 R - Q400 M - Q400 F MIT SEDEO LITE

	Q400 R	Q400 M	Q400 F		Q400 R	Q400 M	Q400 F
Max. Zuladung	136 kg	136 kg	136 kg	Max. Geschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Sitzbreite	385-510 mm	385-510 mm	385-510 mm	Batterie	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah	50 Ah; 60 Ah; 80 Ah
Sitztiefe	410-560 mm	410-560 mm	410-560 mm	Elektronik	VR2	VR2	VR2
Sitzhöhe	415-490 mm	415-490 mm	415-490 mm	Wendekreis	950 mm	560-630 mm	735 mm
Rückenhöhe	460-510 mm	460-510 mm	460-510 mm	Wenderaum	1258 mm	1100 mm	1240 mm
Gesamtbreite	640 mm	610-620 mm	640 mm	Max. Steigfähigkeit	10°	8°	8°
Gesamtlänge	1370 mm	1130 mm	1340 mm	Max. Kantensteigfähigkeit	80 mm (100 mm*)	100mm	70 mm
Gesamthöhe	1400 mm	1400 mm	1400 mm	Antriebsräder	13"	13"	13"
Elektrische Rückenwinkelverstellung	85°-120°	85°-120°	85°-120°	Lenkräder	9"	7"	9"
Sitzneigung	30°	30°	30°	Akzentfarben	4	4	4
Sitzfunktionen	Sitzneigung, Rückenwinkelverstellung (mechanisch oder elektrisch möglich)			Max. Reichweite (ISO 7176-4)	35 km	35 km	35 km
				Rollstuhlgewicht	ab 130 kg	ab 130 kg	ab 130 kg

*Nur mit Bordsteinheber



Sunrise Medical AG
 Erlenuweg 17
 3110 Münsingen
 Fon: 031 958 3838
 info@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.

