

Q700 SERIE

Ihre ultimative Erfahrung



Q Serie
Elektrorollstühle

Fortschrittliche Technik, für Sie massgeschneidert.



Q700
SEDEO PRO



Q700
SEDEO ERGO



Q700-UP
SEDEO ERGO UP

A man wearing a light-colored cap and a dark jacket stands on the left, looking out over a vast landscape. In the center, a woman is seated in a black and red wheelchair, holding a smartphone. The background features rugged mountains and a body of water under a sunset sky with soft, golden light. The overall mood is serene and contemplative.

FORTSCHRITTLICHE TECHNIK FÜR SIE MASSGESCHNEIDERT

QUICKIE, JAY, WHITMYER und SWITCH-IT liefern die umfassendste Auswahl an innovativen und technisch fortgeschrittenen Elektrorollstühlen und Zubehör. Hierdurch kann jeder Elektrorollstuhl individuell auf die klinischen Bedürfnisse und den persönlichen Lebensstil des Nutzers angepasst werden.

THE POWER OF QUICKIE

Von einfacher bis zu komplexer Versorgung. Eine grosse Auswahl an Antriebsarten (Front-, Heck- und Mittelradantrieb), Sitzsystemen, Sondersteuerungen und Zubehör, kann zu dem perfekten Elektrorollstuhl für alle individuellen Bedürfnisse kombiniert werden.

KLINISCHE ANFORDERUNGEN



Q200

SITZSYSTEM	ANTRIEBSART
SLING SEAT	R



Q400

SITZSYSTEM	ANTRIEBSART
SEDEO LITE	M F R



Q500

SITZSYSTEM	ANTRIEBSART
SEDEO PRO	M F R



Q700

SITZSYSTEM	ANTRIEBSART
SEDEO ERGO	M F R
SEDEO PRO	M F R



Q700-UP

SITZSYSTEM	ANTRIEBSART
SEDEO ERGO UP	M F

□ R: Heckantrieb
 □ M: Mittelradantrieb
 □ F: Frontantrieb

FAHREIGENSCHAFTEN


ÜBERBLICK Q700 SERIE

Die Auswahl zwischen drei High-End Sitzsystemen (SEDEO PRO, SEDEO ERGO und SEDEO ERGO UP) zur Anpassung an klinische Bedürfnisse, kombiniert mit einer der drei Antriebsarten (Heck-, Mittelrad- oder Frontantrieb), sowie eine grosse Auswahl innovativer Steuerungen (R-NET sowie SWITCH-IT Eingabegeräte) ermöglichen Bedürfnisse der Nutzer und deren Lebensstil gerecht zu werden.




Heckantrieb

Q700 MIT
SEDEO PRO

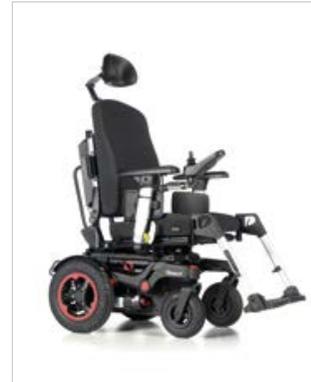


Mittelradantrieb

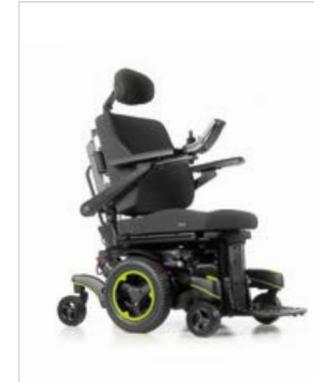


Frontantrieb



Q700 MIT
SEDEO ERGO

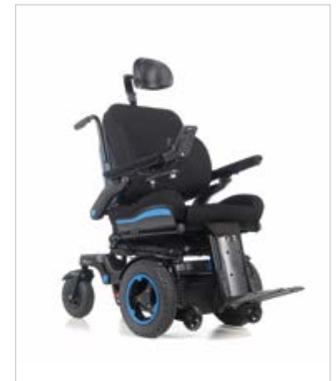

Q700 MIT
SEDEO ERGO UP

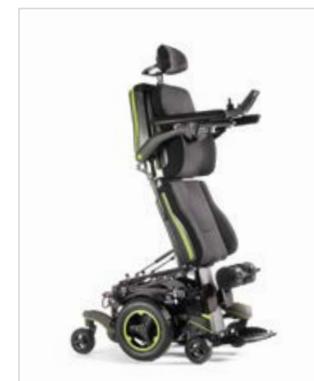

HOCHLEISTUNGS ELEKTROROLLSTÜHLE

Diese Broschüre soll Ihnen einen Überblick über die Funktionen und Optionen der neuen QUICKIE Q700 Serie geben. Ob richtiges Sitzen & Positionieren oder agieren mit Ihrem Umfeld, die neue Q700 Serie passt sich ideal an Ihre klinische Bedürfnisse und persönlichen Lebensstil an.



ANTRIEBSARTEN

Q700 M: Mittelradantrieb

Q700 R: Heckantrieb

Q700 F: Frontantrieb

SITZSYSTEME

SEDEO PRO

SEDEO ERGO

SEDEO ERGO UP

POSITIONIERUNGSOPTIONEN

JAY & WHITMYER

STEUERUNGEN & KONNEKTIVITÄT

REMOTE SEATING App

R-NET Steuerungen

SWITCH-IT Eingabegeräte

LINK-IT Montagesystem

DESIGN

Individueller Stil und Akzentfarben

ANTRIEB WÄHLEN

FRONT-, HECK- ODER MITTELRADANTRIEB

	Q700 R	Q700 M	Q700 F
Antriebsart	Heckantrieb	Mittelradantrieb	Frontantrieb
Max. Wendekreis	950 mm	630 mm	735 mm
Antriebsräder	14"	14"	14"
Lenkräder	9" & 10"	6"	9" & 10"
Höchstgeschwindigkeit	10 km/h		
Batterien	60 Ah; 80 Ah (optional) (Sitzsystem abhängig)		
Max. Steigfähigkeit	10°	10°	8°
Max. Kantensteigfähigkeit	100 mm*	100 mm	70 mm
Max. Reichweite (80 Ah)	35 km (ISO 7176-4)	35 km (ISO 7176-4)	35 km (ISO 7176-4)
Gesamtbreite	640 mm	622 - 660 mm	640 mm
Max. Gesamtlänge	1100 - 1370 mm	1070 - 1190 mm	1280 - 1340 mm

(*nur mit Bordsteinheber, ohne 80 mm)

Die Auswahl der Antriebseinheit beeinflusst das Fahrverhalten des Elektrorollstuhls in unterschiedlichen Situationen und Umgebungen. Somit kann je nach klinischen oder persönlichen Bedürfnissen, Lebensstil oder von der Umgebung abhängigen Ansprüchen der ideale Wegbegleiter konfiguriert werden.

Q700 R HECKANTRIEB

Der Heckantrieb ist die klassische Antriebsart und überzeugt durch hervorragende Fahreigenschaften auch bei hohen Geschwindigkeiten sowie seiner zuverlässigen Kantensteigfähigkeit.



Mit der ultimativen Allradfederung, extrem starken 4-Pol Motoren in 10 km/h und bis zu 80 Ah Batterien zur Maximierung Ihrer Reichweite, haben Sie mit dem Q700 M einen verlässlichen Wegbegleiter.

Q700 M **MITTELRADANTRIEB**

Der Mittelradantrieb bietet unübertroffene Wendigkeit mit einer kleineren Grundfläche als Heck- oder Frontantrieb. Er hat den kompaktesten Wendekreis, ist extrem intuitiv zu fahren und zu steuern.



Q700 F **FRONTANTRIEB**

Die kompakten Abmasse und der Schwerpunkt zwischen Antriebsachse und Lenkrad sind die Vorzüge dieses Modells. Dank der grossen Antriebsräder sind Kanten von bis zu 100 mm leicht zu überwinden.




ANTRIEBSARTEN

Q700 M

MITTELRADANTRIEB

Der Q700 Mittelradantrieb setzt neue Massstäbe für Elektrorollstühle für drinnen und draussen. Mit seiner überlegenen Fahrleistung, sind Sie unabhängiger als je zuvor.

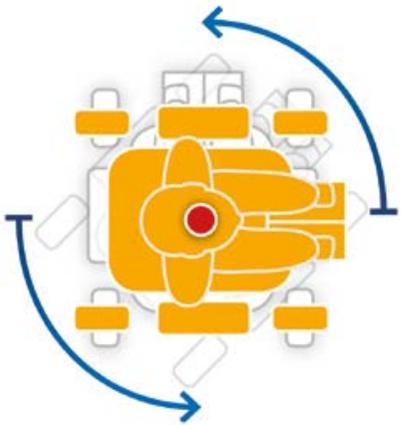

LEICHTER MANÖVRIEREN

Drehung auf der Stelle, enge Kurven sicher fahren – kein Problem. Der Mittelradantrieb bietet eine sechsfach Einzelradaufhängung: Alle sechs Räder haben permanenten Kontakt zum Untergrund und halten den Nutzer stets in einer ruhigen sowie stabilen Position.




FÜR DEN AUSSENBEREICH ENTWICKELT




INNOVATIVE FAHRWERKSTECHNOLOGIE

Stabilität, Sicherheit und volle Kontrolle auf jedem Untergrund mit SpiderTrac™. Das innovative, patentierte SpiderTrac™ Fahrwerk harmonisiert über Dämpfer die Bewegungen des gesamten Elektrorollstuhls. Die über eine Verbundmechanik gekoppelten Lenkradarme reduzieren die Bewegung des Sitzes auf ein Minimum.

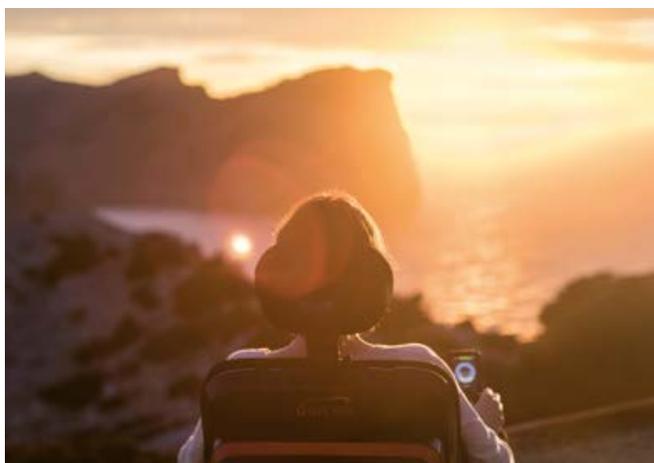

MAXIMALE UNABHÄNGIGKEIT

Mit unglaublich zuverlässigen 4-Pol Motoren mit hohem Drehmoment, mit Geschwindigkeiten von 10 km/h und der Auswahl zwischen 60 und 80 Ah Batterien, um die Reichweite zu erhöhen, können Sie mit dem Q700 M immer selbstbestimmt reisen.

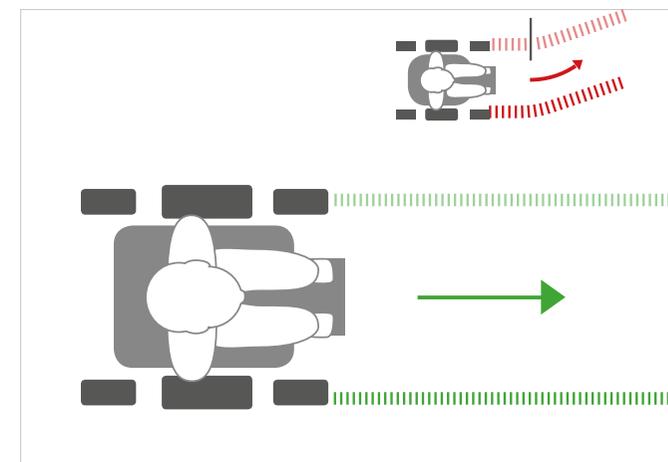

ELEKTRONISCHER SPURASSISTENT

Der optionale Gyro Spurassistent des Q700 kompensiert automatisch jegliche Unebenheiten des Untergrundes und hält den Elektrorollstuhl in der Spur. Dies ist besonders von Vorteil bei Verwendung von Sondersteuerungen.

ANTRIEBSARTEN

Q700 F FRONTANTRIEB

Der Q700 F mit nach innen gekröpften Lenkradarmen ist reaktionsschnell und bietet somit optimale Eigenschaften für das Fahren im Innenbereich.

Sowohl der Q700 F als auch der Q700 R bieten mit ihrer niedrigen Sitzhöhe von 415 mm (425 mm mit Sitzlift & Sitzneigung) einen guten Zugang zu rollstuhlgerecht umgerüsteten Fahrzeugen und ermöglichen ein nahes Heranfahren an Gegenstände, wie z. B. Tische.

Q700 R HECKANTRIEB

Der Q700 Heckantrieb ist durch die Position des Antriebsrads sehr leicht zu bedienen. Mit dem Bordsteinheber kann er Kanten von bis zu 100 mm erklimmen.



STARKE FAHRLEISTUNG IM FREIEN

Das Design des Q700 F & R kombiniert mit der ultimativen Federung aller 4 Räder, leistungsstarken Motoren und der Traktionskontrolle mit Ausgleichsfunktion, bietet unglaubliche Traktion und Kontrolle für beispielloses Fahrverhalten im Freien.




ALLRAD FEDERUNG

Optimaler Komfort mit einer unabhängigen Federung aller 4 Räder. Mit dieser Federung können Sie problemlos jedes Hindernis überwinden. Die neue Lenkradarm-Federung gleicht Unebenheiten im Gelände aus und optimiert so Ihr Fahrerlebnis.




TRAKTIONSKONTROLLE

Maximale Traktion dank der einzigartigen Pendelachsen-Technologie. Beide Antriebsräder sind durch eine Pendelachse verbunden, die bei hoher Geschwindigkeit der natürlichen Zugkraft entgegenwirkt. Dadurch behalten beide Räder immer die maximale Traktion bei.

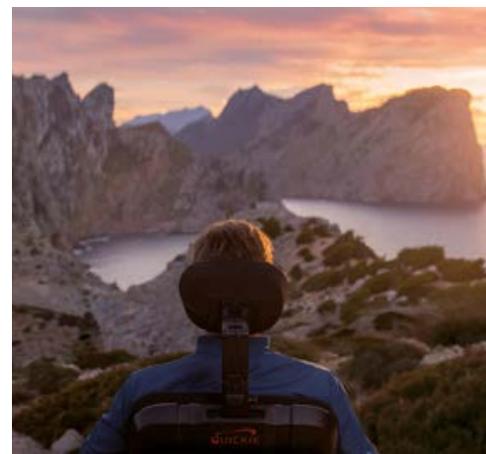

MAXIMALE FREIHEIT

Aufgrund der grossen Antriebsräder, der leistungsstarken Motoren und Batterien können Sie sich immer auf jedem Terrain auf Ihren Q700 F & Q700 R verlassen und Ihre Freiheit genießen.

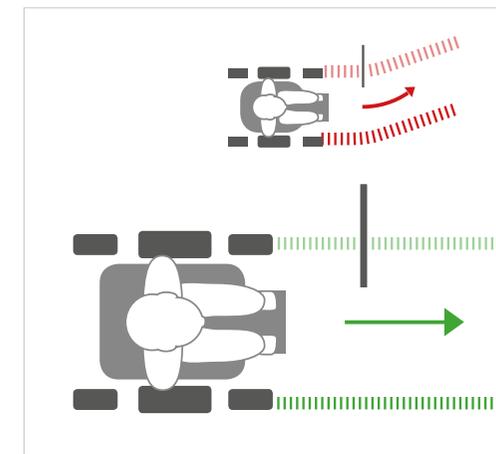

ELEKTRONISCHER SPURASSISTENT

Der optionale Gyro Spurassistent des Q700 kompensiert automatisch jegliche Unebenheiten des Untergrundes und hält den Elektrorollstuhl in der Spur. Dies ist besonders von Vorteil bei Verwendung von Sondersteuerungen.

SITZSYSTEM WÄHLEN:

SEDEO PRO, SEDEO ERGO, SEDEO ERGO UP.

	SEDEO PRO	SEDEO ERGO	SEDEO ERGO UP
Klinische Anforderungen	Mittel	Mittel bis Hoch	Hoch/Stehfunktion
Sitzbreite	380 - 560 mm	400 - 560 mm	400 - 500 mm
Sitztiefe	400 - 560 mm	400 - 560 mm	400 - 540 mm
Rückenhöhe	440 - 620 mm	510 - 610 mm	510 - 610 mm
Konfigurierbar	Hoch	Niedrig	Niedrig
Stehen	-	-	Ja
Liegen	-	Ja	Ja
Progammierbare Sitzfunktion	-	Ja	Ja
Elektr. Rückenwinkelverstellung	90°/150°	90°/175°	85°/175°
Biomechanischer Längenausgleich	100 mm (optional)	180 mm (Std.)	180 mm (Std.)
Druckentlastungserinnerung	-	Ja	Ja
Sitzneigung	30°/50°	30°/50°	22°
Sitzlift	300 mm	300 mm	200 mm
JAY & WHITMYER (BB)	Ja	Ja	Ja
Remote Seating App	-	Ja	Ja
Max. Zuladung	160 kg	160 kg	120 kg

SEDEO PRO

Ein vollständig einstellbarer Sitzrahmen mit einer grossen Auswahl von Komfort Kissen und Positionierungsoptionen. Dank eines breiten Spektrums an Armauflagen, Armpolstern, Beinauflagen, Sitz- und Rückenkissen, Kopfstützen Positionierungselementen, kann das Sedeo Pro Sitzsystem flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.



SEDEO ERGO

Biomechanisches Sitzsystem auf höchstem Niveau mit der vollen Auswahl programmierbarer Sitzpositionen. SEDEO ERGO ermöglicht mit seinem patentierten biomechanischen Rückensystem einen Längenausgleich von bis zu 180 mm. Zudem bietet es eine biomechanische Repositionierungsfunktion mit vielen Möglichkeiten Sitz und Rücken einzustellen, einen einfachen Transfer, 90° Kniewinkel in sitzender Position und eine Druckentlastungserinnerung.



SEDEO ERGO UP

Biomechanisches Sitzsystem auf höchstem Niveau mit der Auswahl von 6 programmierbaren Sitzpositionen inklusive einer Stehfunktion. Es beinhaltet alle Vorteile des SEDEO ERGO Sitzsystems mit einer zusätzlichen Stehfunktion. Das SEDEO ERGO UP Sitzsystem bietet einen Stehwinkel von bis zu 85° und gleichzeitig eine sehr hohe Stabilität.



SEDEO PRO

Das SEDEO PRO Sitzsystem verbindet einen hochgradig umfassenden und konfigurierbaren Sitzrahmen mit einer ausgezeichneten Auswahl von Unterstützungs- und Positionierungsoptionen. Unter anderem ein breites Spektrum an SEDEO PRO Sitz- und Rückenkissen für geringe oder mittlere klinische Bedürfnisse.

Das SEDEO PRO Sitzsystem bietet Komfort und hohe Unabhängigkeit im Alltag.

SCHNELL & EINFACH ANPASSBAR

Der SEDEO PRO Sitzrahmen bietet hohe Flexibilität. Einstellungen am Sitzsystem können auch mit dem Nutzer im Elektrorollstuhl durchgeführt werden. Einfach und schnell anpassbar, mit nur einem Werkzeug individualisieren Sie ihr Sitzsystem und passen es Ihren persönlichen Anforderungen an.



HOCHGRADIG ANPASSBARES SITZSYSTEM



BIOMECHANISCHER RÜCKEN

Entdecken Sie den neuen optionalen Biomechanischen Rücken der einen Längenausgleich von bis zu 100 mm ermöglicht. Der biomechanische Längenausgleich vermindert die Scherkräfte. Er ist als fester Rücken, mechanisch oder elektrisch verstellbarer Rücken erhältlich.

ELEKTRISCH HOCHSCHWENKBARE FUSSRASTE

Die elektrisch hochschwenkbare Fussraste mit Längenausgleich ermöglichen Ihnen, die für Sie beste Position zu erreichen und diese immer beizubehalten. Die Fussraste ist als zentralmontierte und als abschwenkbare Version erhältlich. Sie können zwischen einem 70° abschwenkbaren sowie einem manuell abschwenkbaren Fussrastenhalter wählen.

FLEXIBLES RÜCKENKISSEN

Für das SEDEO PRO Sitzsystem gibt es eine grosse Auswahl an Sitz- und Rückenkissen. Inklusiv dem flexiblen Rückenkissen mit anpassbaren Gurten, seitlicher Unterstützung für einzigartigen Komfort und einer einfachen Positionierung.

POSITIONIERUNGSOPTIONEN


Viele Positionierungselemente wie z. B. Kopfstützen von SEDEO und WHITMYER, abschwenkbare Seitenpelotten, Oberschenkel- oder Kniestützen sind optional verfügbar. Alle Positionierungselemente sind einfach abklappbar oder abnehmbar.

HOCHKLAPPBARE ARMLEHNEN

Die einfach zu bedienenden hochklappbaren Armlehnen bieten freien Raum für Transfers. Sie können zwischen einer abnehmbaren und mitlaufenden Variante wählen. Alle Armlehnen sind mit den verfügbaren Armpolstern kombinierbar.

SEDEO ERGO

Erleben Sie den Unterschied mit dem Q700 M SEDEO ERGO. Die Kombination aller Vorteile des SEDEO ERGO Sitzsystems mit C-Me Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit für ein selbstbestimmtes Leben.

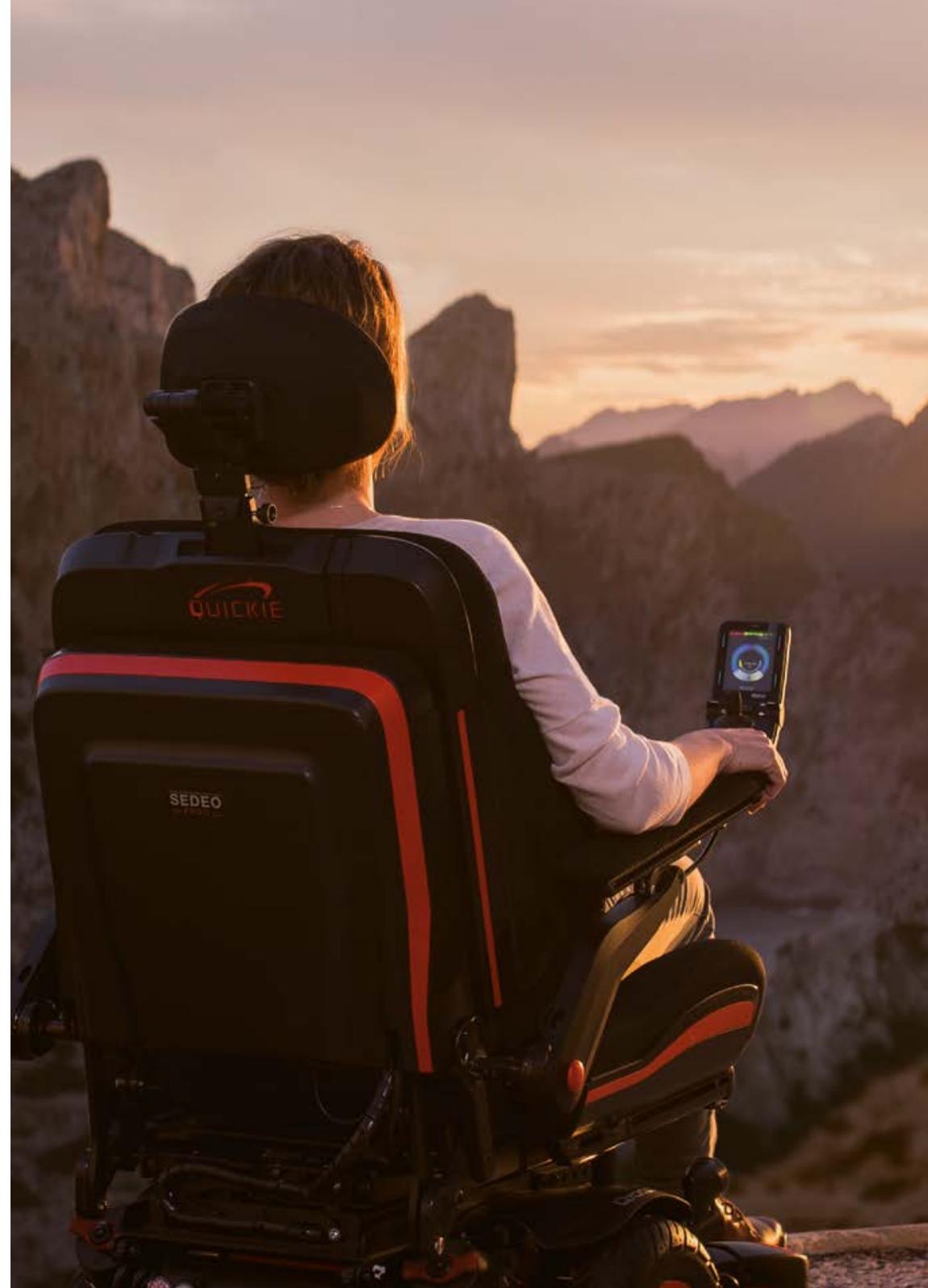

INTELLIGENTES SITZSYSTEM



BIOMECHANISCHE REPOSITIONIERUNG

Aus einer liegenden Position heraus oder zurück in die richtige Sitzposition erfordert meist die Nutzung der Sitzneigung. Wenn Sie mit der patentierten biomechanischen Repositionierung aus der liegenden in die sitzende Position wechseln, wird zunächst eine geneigte Zwischenposition durchlaufen, um Ihr Becken in einer sanften und mühelosen Bewegung mittels Schwerkraft neu auszurichten.

BIOMECHANISCHER RÜCKEN

Dank dem patentierten biomechanischen Rückensystem, welcher einen Längenausgleich bis zu 180 mm ermöglicht, bleiben Kopf- und Kinnsteuerung trotz Bewegung des Rückens und Verstellung des Rückenwinkels in der gleichen Bedienposition.

DRUCKENTLASTUNGSERINNERUNG

Eine Erinnerungsfunktion zur Druckentlastung teilt Ihnen mit, wann es Zeit ist, die Sitzposition zu wechseln. Ein Protokoll kann gespeichert und mit Therapeuten und Ärzten per E-Mail geteilt werden.

AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANPASSBAR

Die Premium Kopfstütze ist einfach verstell- und komplett abnehmbar. Alle Sitzbreiten und -tiefen sind stufenlos mit nur einem Werkzeug anpassbar. Die Sitz- und Rückenkissenbreite kann unabhängig voneinander angepasst werden. Auch die Höhe der Armlehnen und Winkeleinstellungen sind einfach einstellbar.

EINFACHES EINSTIEGSSYSTEM


Das Sitzkissen ist in 3 geteilt. Die zwei seitlichen Kissen können abgeschwenkt oder abgenommen werden, um einen komfortablen Transfer zu ermöglichen. Der mittlere Teil kann auch z. B. durch ein JAY-Kissen ersetzt werden.

FUSSPLATTE BIS ZUM BODEN

Da die Fussplatte bis zum Boden absenkbar ist, werden so auch Transfers – aus und in den Rollstuhl – im Stehen möglich gemacht.

SEDEO ERGO UP

Für alle, die das Leben aus neuen Höhen erfahren möchten:
Entdecken Sie den SEDEO ERGO UP. Kombinieren Sie alle Vorteile des SEDEO ERGO Sitzsystems mit der Möglichkeit zu stehen, wann immer Sie es möchten.

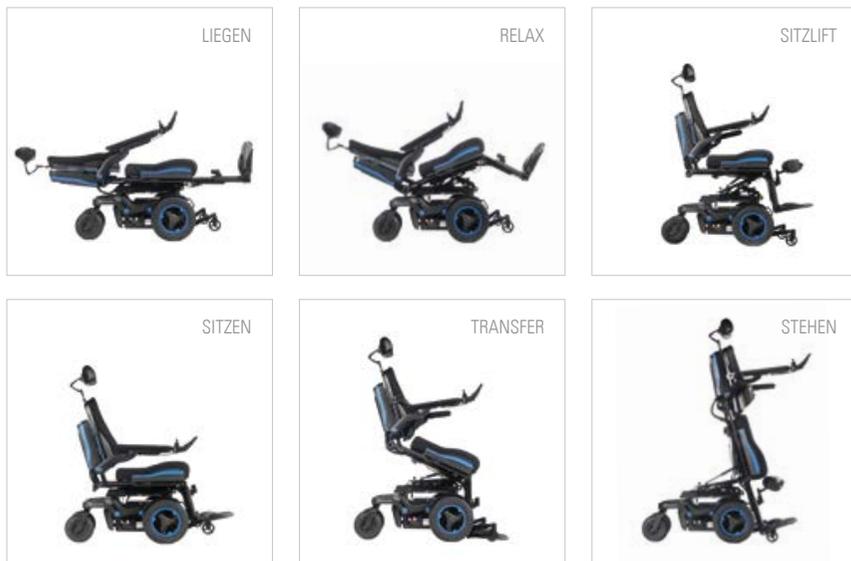

MEMORY POSITIONEN

Jede der sechs Memory Positionen kann individuell programmiert werden, indem der Memory Button gedrückt und gleichzeitig der Joystick für drei Sekunden nach hinten gezogen wird. Ein kurzer Hinweiston bestätigt die Einprogrammierung.



STEHFUNKTION



Der Q700-UP M ermöglicht es Ihnen jederzeit zu stehen und bietet darüber hinaus noch weitere Vorteile für Ihre Gesundheit:

VOORTEILE DES STEHENS

- Erleichtert die Atmung
- Verbessert die Druckentlastung
- Entlastet Organe wie Lunge, Darm und Blase
- Verbessert die Durchblutung
- Reduziert Spastiken
- Fördert die Knochengesundheit und verringert Skelett deformitäten
- Stärkt das Herz-Kreislauf-, sowie das Lymphsystem
- Kräftigt Stütz- und Bewegungssystem und beugt Gelenkeinschränkungen vor

90° KNIIEWINKEL

Die neue elektrische Zentral-Beinstütze bietet einen echten 90° Kniewinkel in sitzender Position. Das ergonomische Kniepolster ist auch in Tiefe und Breite einstellbar.

JAY & WHITMYER

POSITIONIERUNGSOPTIONEN

Mit SEDEO ERGO und SEDEO ERGO UP sind eine Vielzahl von WHITMYER Kopfstützen, JAY Sitzkissen und Rücken kombinierbar, um unterschiedliche klinische Bedürfnisse zu erfüllen und sicherzustellen, die bestmögliche Positionierung zu gewährleisten.




WHITMYER KOPFSTÜTZEN

Um Positionierungsanforderungen von der Basisunterstützung bis hin zur multiplen Punktunterstützung zu erfüllen, hat Whitmyer unterschiedliche Kopfstützen entwickelt. Das Befestigungssystem lässt sich perfekt mit einer Reihe von Pads kombinieren und bietet eine breite Palette an Lösungen zur Unterstützung und/oder Kontrolle der Halswirbelsäule und des Kopfes.

JAY KISSEN & RÜCKEN

JAY Sitzkissen und Rücken wurden für grösstmögliche Stabilität und Hautschutz entwickelt. Sie sind einfach und individuell anpassbar und können somit unterschiedlichsten Positionierungsanforderungen gerecht werden.

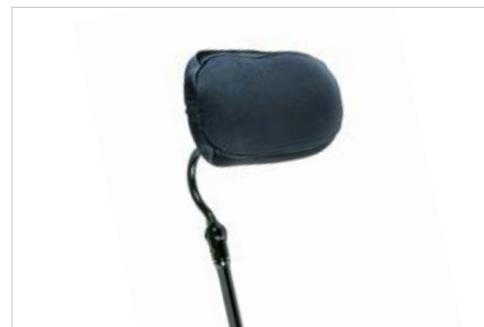

SWITCH-IT REMOTE SEATING APP




Die Remote Seating App spielt eine wichtige Rolle im Druckentlastungsmanagement. Mit ihr können Sie Ihren Druckentlastungsfortschritt selbst überwachen und Daten mit Ihrem Betreuer-Netzwerk sicher teilen. Die App verfolgt wichtige Sitzpositionen wie z. B. Sitzneigung, Rückenwinkel und Beinheben sowie die Dauer dieser Positionen.

DATEN. WENN SIE ES WOLLEN. WO SIE ES WOLLEN.

Die Switch-It Remote Seating App misst permanent die Sitzwinkel und registriert die Zeit, in der Sie in einer Sitzposition verbleiben, um Ihre allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden durch Druckentlastungsmanagement zu verbessern und Druckstellen vorzubeugen.



- Bluetooth Technologie verbindet sich kabellos mit dem Rollstuhl.
- Live Berichte über Sitzwinkel, -dauer und -neigung können erstellt werden.
- Berichte können mit Therapeuten und Ärzten per E-Mail geteilt werden.
- Unterstützt bei der Erstellung von Druckentlastungsplänen.
- Benachrichtigt den Nutzer seine Sitzposition anzupassen.

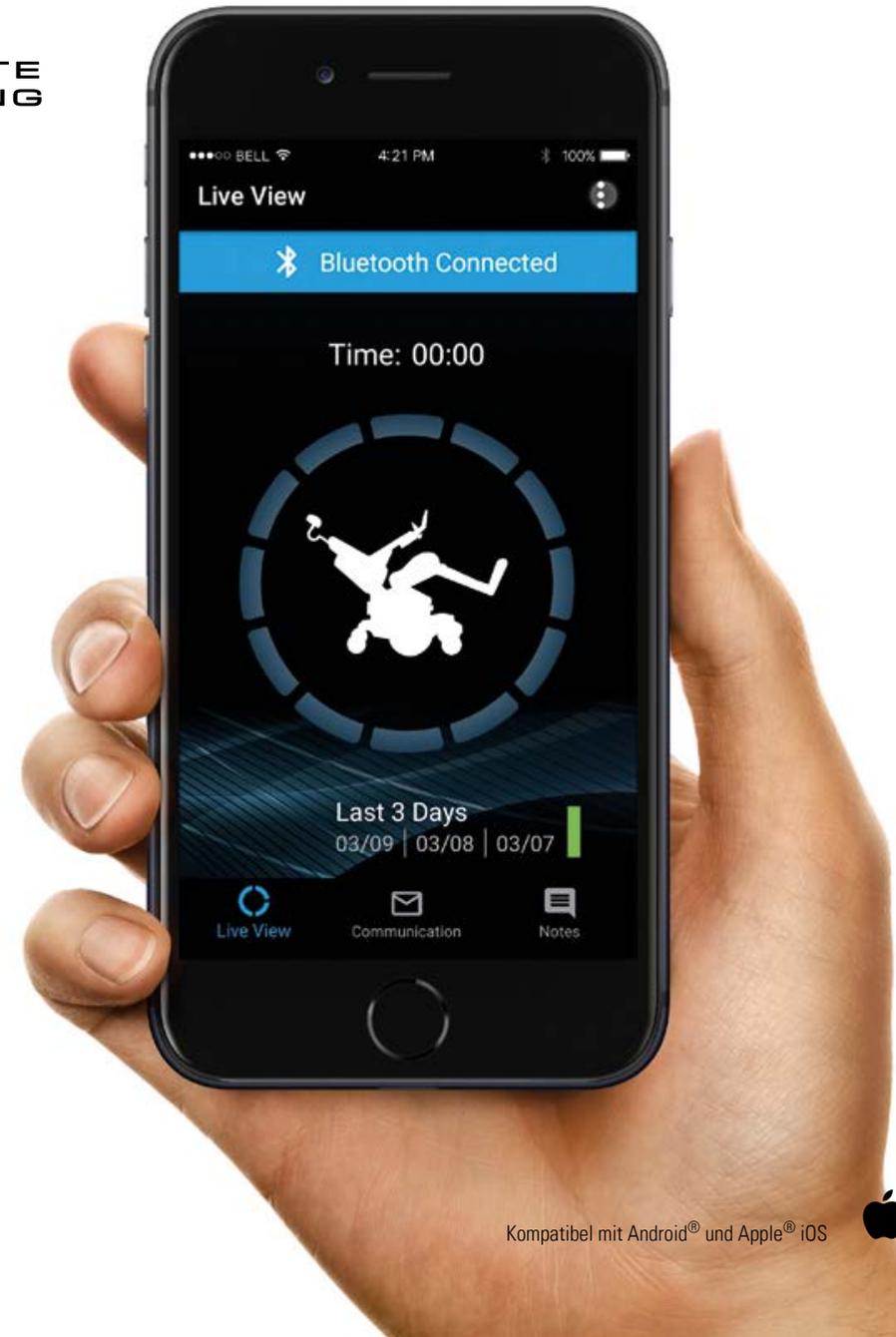

STEUERUNG & KONNEKTIVITÄT

KONTROLLE AUF KNOPFDRUCK

Mit innovativer Technologie Ihr Umfeld effektiv steuern:
Bedienen Sie mit Ihrem Q700 Geräte, wie Mobiltelefon, Computer und
Tablet mit IR oder Bluetooth Funktion.



R-NET

ADVANCED JOYSTICK

Jeder Elektrorollstuhl der Q700 Serie erhält standardmässig ein innovatives R-Net Bedienpult. Ein grosses, gut lesbares HD-Display und einfach zu bedienende Tasten ermöglichen eine intuitive Bedienung.

KONNEKTIVITÄT

Neues Bedienpult mit integrierter Infrarot Funktion und erweitertem Multifunktionsdisplay. Dies ermöglicht ein Bedienen von Geräten mit Infrarot Schnittstelle.

BLUETOOTH & IDEVICE

Einfache Steuerung von Mobiltelefon, Computer, Tablet und anderen Geräten (2 Android/Windows und 2 IOS Geräte). Bis zu drei Geräte lassen sich über separate Bluetooth Module ansteuern.

PATENTIERTE ZUORDENBARE-TASTEN-TECHNOLOGIE

Die von Sunrise Medical patentierte, optionale Tasten-Technologie bietet vielfältige, softwareintegrierte und benutzerfreundliche Möglichkeiten für die Verbesserung der Lebensqualität.




SWITCH-IT

INNOVATIVE STEUERUNGEN

Mit der Memory Funktion (erhältlich für SEDEO ERGO und SEDEO ERGO UP) flexibel in jede Position – auf Wunsch können einfach per Knopfdruck die vordefinierten Sitzfunktionen mittels der 5-Tasten Box angesteuert werden. Standardmässig besitzt jede 5-Tasten Box eine USB Ladebuchse für das Laden mobiler Geräte.

ALTERNATIVE SONDERSTEUERUNGEN

Wenn das Fahren mit einem herkömmlichen Joystick nicht die für Sie beste Option ist, können Sie mit den Switch-It Eingabegeräten die Vorteile und das Fahrpotential Ihres Elektrorollstuhles ausschöpfen.

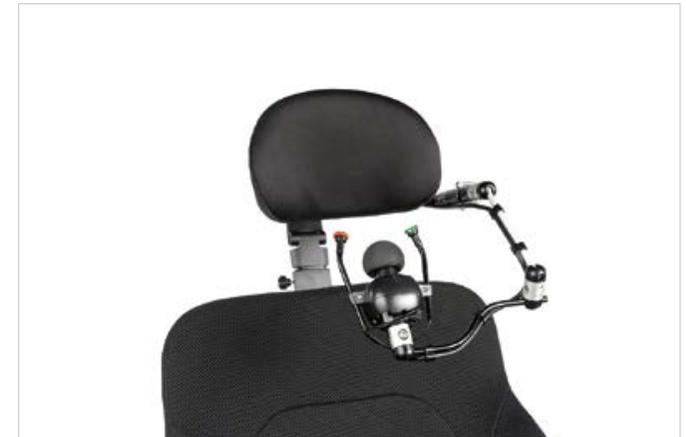

LINK-IT MONTAGESYSTEM

Sollen zusätzliche Sondersteuerungen oder Taster verwendet werden? Mit Link-It, dem neuen Befestigungssystem im modularen Baukastenformat, ist nichts unmöglich.

Aus den verfügbaren Modulen und Stäben können unendlich viele Kombinationen erstellt werden, um die verschiedenen Anforderungen zu erfüllen. Link-It ist nicht nur leicht und einfach zu positionieren, sondern sorgt auch dafür, dass das minimalistische Design des Rollstuhls bestehen bleibt. Ob es ein zusätzliches Bedienpult sein soll, ein Taster am Rücken oder ein Schalter an der Kopfstütze, einfach Link-It.






QUICKIE



DESIGN UND OPTIK

INDIVIDUELLER STYLE

Mit der Q700 Serie haben wir in Punkto Design ein neues Level erreicht. Die Antriebseinheit in Mattschwarz in Kombination mit dem ansprechenden Sitzsystem, ergeben ein schlankes und modernes Design.

Individualisieren Sie Ihren Q700!

Geben Sie Ihrem QUICKIE Q700 Elektrorollstuhl eine persönliche Note; Mit der Auswahl Ihres bevorzugten Farbakzents können Sie die markante Mattschwarze Antriebseinheit perfekt ergänzen.





Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.

