

Q700 SÉRIE

Une expérience inouïe



Fauteuils roulants électriques
Série Q

Haute technologie sur mesure, pour vous.



Q700
SEDEO PRO



Q700
SEDEO ERGO



Q700-UP
SEDEO ERGO UP



HAUTE TECHNOLOGIE SUR MESURE, POUR VOUS

QUICKIE, JAY, WHITMYER et SWITCH-IT proposent le choix de fauteuils roulants et d'accessoires innovants de haute technologie le plus complet. Ceci permet d'adapter individuellement chaque fauteuil aux besoins cliniques et au style de vie de l'utilisateur.

THE POWER OF QUICKIE

De l'équipement le plus simple au plus complexe. Une large palette de types d'entraînement (traction avant, arrière et centrale), systèmes d'assise, commandes spéciales et accessoires peuvent être combinés pour un fauteuil parfait, adapté à chaque besoin individuel.

EXIGENCES CLINIQUES



Q200

SYSTÈME D'ASSISE SLING SEAT	TYPE D'ENTRAÎNEMENT R
---------------------------------------	---------------------------------



Q400

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO LITE	TYPE D'ENTRAÎNEMENT M F R
---------------------------------------	---



Q500

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO PRO	TYPE D'ENTRAÎNEMENT M F R
--------------------------------------	---



Q700

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO ERGO	TYPE D'ENTRAÎNEMENT M F R
SEDEO PRO	TYPE D'ENTRAÎNEMENT M F R



Q700-UP

SYSTÈME D'ASSISE SEDEO ERGO UP	TYPE D'ENTRAÎNEMENT M F
--	--------------------------------------

□ R : roues motrices arrière
 □ M : roues motrices centrales
 □ F : roues motrices avant

CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE

VUE D'ENSEMBLE

VUE D'ENSEMBLE SÉRIE Q700

Le choix entre trois systèmes d'assise High-End (SEDEO PRO, SEDEO ERGO et SEDEO ERGO UP) s'adaptant aux exigences cliniques, combiné à l'un des trois types d'entraînement (traction avant, arrière et centrale), ainsi qu'à un grand choix de commandes innovantes (périphériques d'entrée VR2, R-NET et SWITCH-IT) permettent de répondre aux besoins et au style de vie de l'utilisateur.



Roues motrices arrière

**Q700 AVEC
SEDEO PRO**




Roues motrices centrales





Roues motrices avant



**Q700 AVEC
SEDEO ERGO**

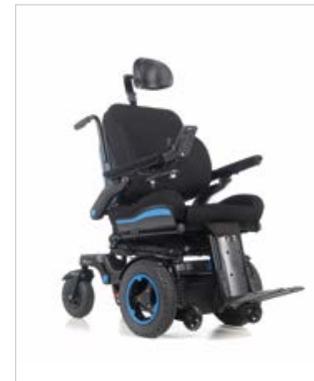

**Q700 AVEC
SEDEO ERGO UP**

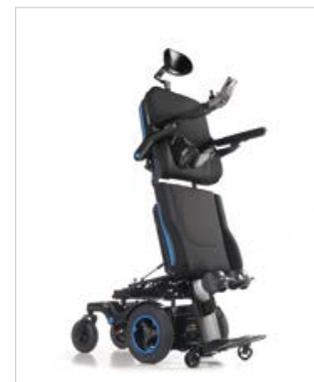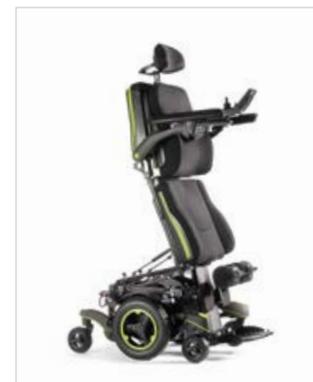

FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES DE HAUTE PERFORMANCE

Cette brochure vous donnera une vue d'ensemble des fonctions et des options de la nouvelle série QUICKIE Q700.

Qu'il s'agisse de s'asseoir et de se positionner correctement ou d'agir avec son environnement, la nouvelle série Q700 s'adapte de manière idéale à vos besoins cliniques et à votre style de vie.



TYPE D'ENTRAÎNEMENT

Q700 M : roues motrices centrales

Q700 R : roues motrices arrière

Q700 F : roues motrices avant

SYSTÈMES D'ASSISES

SEDEO PRO

SEDEO ERGO

SEDEO ERGO UP

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

JAY & WHITMYER

COMMANDE & CONNECTIVITÉ

App REMOTE SEATING

Commande R-NET (selon le système d'assise)

Périphériques d'entrée SWITCH-IT

Système de fixation LINK-IT

DESIGN

Style personnel et touches de couleur

TYPES D'ENTRAÎNEMENTS

CHOISIR SON TYPE D'ENTRAÎNEMENT

TRACTION AVANT, ARRIÈRE OU CENTRALE

	Q700 R	Q700 M	Q700 F
Type d'entraînement	arrière	central	avant
Rayon de braquage max.	950 mm	630 mm	735 mm
Roues motrices	14"	14"	14"
Roues directrices	9" & 10"	6"	9" & 10"
Vitesse maximale	10 km/h		
Batteries	60 Ah; 80 Ah (en option) (selon le type d'assise)		
Stabilité dynamique max.	10°	10°	8°
Capacité de franchissement	100 mm*	100 mm	70 mm
Autonomie max. (80 Ah)	35 km (ISO 7176-4)	35 km (ISO 7176-4)	35 km (ISO 7176-4)
Largeur totale	640 mm	622 - 660 mm	640 mm
Longueur totale max.	1100 - 1370 mm	1070 - 1190 mm	1280 - 1340 mm

(* uniquement avec monte-trottoir, sans 80 mm)

Le choix de la base motrice influence le comportement du fauteuil électrique dans différents contextes ou environnements. C'est pourquoi, selon les besoins cliniques ou personnels, le style de vie ou l'environnement, il est possible de configurer son compagnon idéal.

Q700 R ROUES MOTRICES ARRIÈRE

La traction arrière est le mode d'entraînement classique et il séduit par ses qualités de conduite exceptionnelles même à vitesse élevée, de même que par la fiabilité de sa capacité de gravissement.



Avec ses suspensions exceptionnelles, ses moteurs 4 pôles à 6, 10 ou 13 km/h et une batterie de 80 Ah pour une autonomie optimale, vous avez avec le Q700 M un compagnon de confiance.

Q700 M **ROUES MOTRICES CENTRALES**

Les roues motrices centrales permettent une maniabilité inégalée grâce à une base plus petite que pour la traction avant ou arrière. Il possède le rayon de braquage le plus compact et se conduit de manière intuitive.



Q700 F **ROUES MOTRICES AVANT**

Les dimensions compactes et le centre de gravité situé entre axe d'entraînement et roues directrices sont les avantages de ce modèle. Grâce à ses grandes roues motrices, même les bordures de 70 mm se franchissent facilement.




TYPES D'ENTRAÎNEMENTS

Q700 M


ROUES DIRECTRICES CENTRALES

Avec ses roues motrices centrales, le Q700 fixe de nouveaux critères pour les fauteuils roulants d'extérieur et d'intérieur. Ses étonnantes performances de conduite vous rendent plus indépendant que jamais.

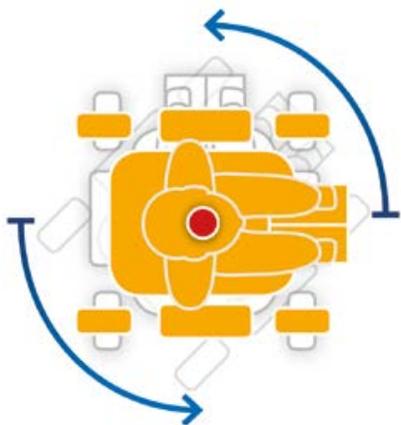

MANŒUVRES FACILITÉES

Pivotement sur place, virages serrés, conduite sûre – pas de problème. Les roues motrices centrales bénéficient de six suspensions indépendantes : elles sont en contact permanent avec le sol et l'utilisateur se trouve toujours dans une position stable et rassurante.

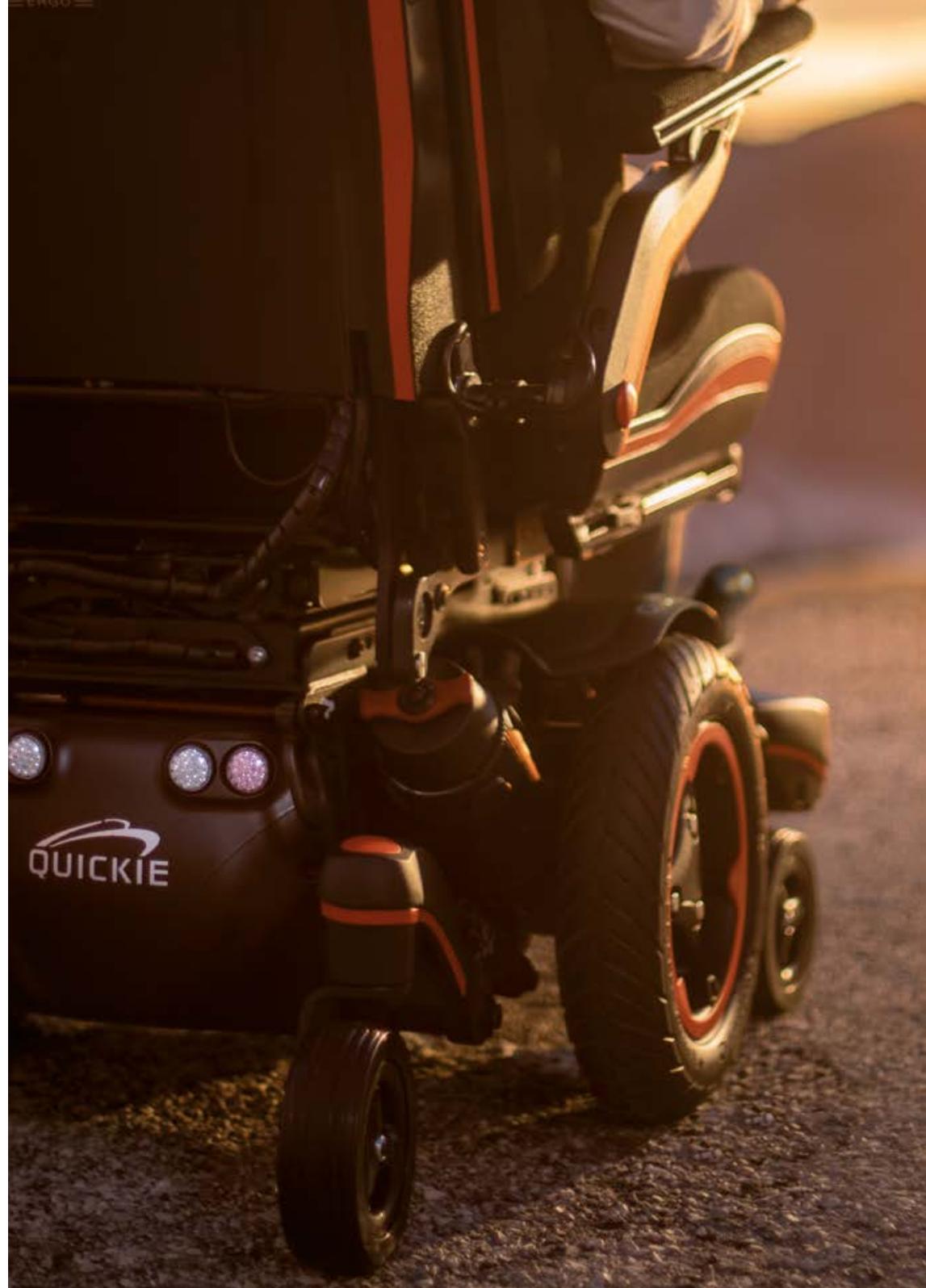

DÉVELOPPÉ POUR L'EXTÉRIEUR




TECHNOLOGIE DE SUSPENSION INNOVANTE

Stabilité, sécurité et contrôle total sur tout type de terrain avec SpiderTrac™. La suspension innovante et brevetée SpiderTrac™ harmonise grâce aux amortisseurs les mouvements du fauteuil dans son ensemble. Les bras de roues reliés mécaniquement réduisent au minimum les mouvements de l'assise.



INDÉPENDANCE MAXIMALE

Avec son moteur 4 pôles incroyablement fiable bénéficiant d'un couple élevé, de vitesse de 10 km/h, le choix entre des batteries de 60 ou 80 Ah afin d'augmenter votre autonomie, vous pouvez constamment voyager en toute indépendance avec votre Q700 M.

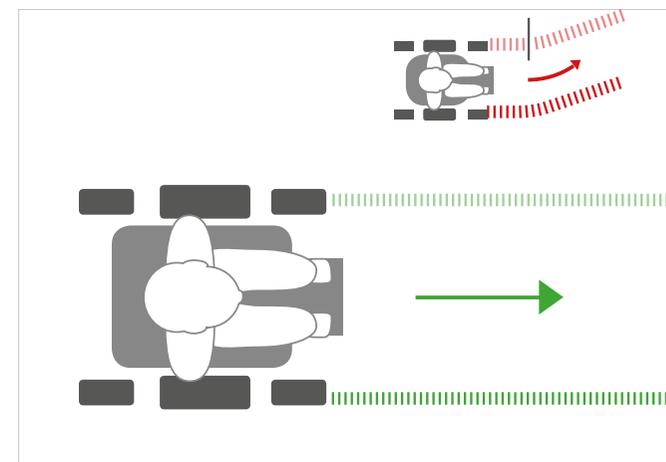

ASSISTANT ÉLECTRONIQUE DE MAINTIEN DE VOIE

En option, l'assistant de maintien de voie Gyro compense automatiquement toute irrégularité du sol et maintient le fauteuil roulant sur sa voie. Ceci est surtout un avantage lorsque l'on utilise les commandes spéciales.

TYPES D'ENTRAÎNEMENTS

Q700 F

ROUES MOTRICES AVANT

Le Q700 F, dont les bras de roues directrices sont coudés vers l'intérieur, est réactif et offre ainsi des propriétés optimales pour la conduite en intérieur.

Aussi bien le Q700 F que le Q700 R disposent d'une assise basse de 415 mm (425 mm avec élévation et inclinaison d'assise) qui facilite l'accès aux véhicules adaptés aux fauteuils roulants, de même que l'approche au plus près des objets, comme les tables par exemple.

Q700 R

ROUES MOTRICES ARRIÈRE

Le Q700 traction arrière est plutôt facile à utiliser grâce à la position de ses roues motrices. Équipé du monte-trottoir, il peut gravir des bordures allant jusqu'à 100 mm.



SOLIDE PERFORMANCE DE CONDUITE EN PLEIN AIR

Le design des Q700 F & R, combiné à l'excellente suspension des 4 roues, aux puissants moteurs et au contrôle de traction avec fonction d'équilibrage, offre une traction et un contrôle incroyables pour une tenue de route inégalée en plein air.



SUSPENSIONS TOUTES ROUES

Un confort optimal avec une suspension indépendante sur les 4 roues. Grâce à cette suspension, vous pouvez surmonter sans problème tous les obstacles. La nouvelle suspension du bras de roue motrice compense les irrégularités du terrain et optimise ainsi votre conduite.




CONTRÔLE DE TRACTION

Traction maximale grâce à la technologie exclusive de l'essieu oscillant. Les deux roues motrices sont reliées par un essieu oscillant qui contre la résistance de traction naturelle en cas de vitesse élevée. Les deux roues gardent ainsi toujours leur traction maximale.



LIBERTÉ MAXIMALE

En raison de leurs grandes roues motrices, de leurs batteries et de leurs puissants moteurs, vous pouvez compter sur vos Q700 F & Q700 R sur tout type de terrain et savourer votre liberté.

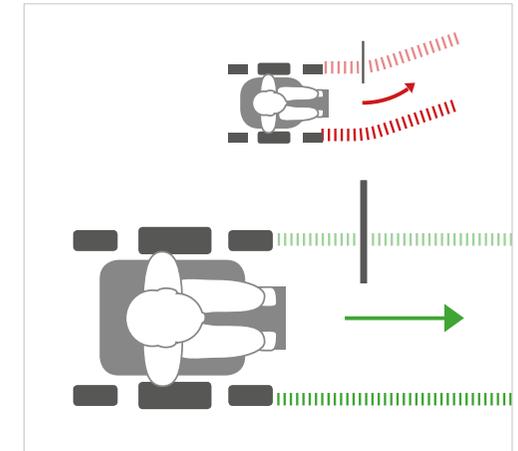

ASSISTANT ÉLECTRONIQUE DE MAINTIEN DE VOIE

L'assistant de maintien de voie Gyro (en option) compense automatiquement toute irrégularité du sol et maintient le fauteuil roulant sur sa voie. Ceci est surtout un avantage lorsque l'on utilise les commandes spéciales.

CHOISIR SON SYSTÈME D'ASSISE :

SEDEO PRO, SEDEO ERGO, SEDEO ERGO UP.

	SEDEO PRO	SEDEO ERGO	SEDEO ERGO UP
Exigences cliniques	moyennes	moyennes à élevées	élevées/fonction debout
Largeur d'assise	380 - 560 mm	400 - 560 mm	400 - 500 mm
Profondeur d'assise	400 - 560 mm	400 - 560 mm	400 - 540 mm
Hauteur de dossier	440 - 620 mm	510 - 610 mm	510 - 610 mm
Configurabilité	élevée	faible	faible
Debout	-	-	oui
Couché	-	oui	oui
Fonctions d'assise programmables	-	oui	oui
Réglage de dossier électronique	90°/150°	90°/175°	85°/175°
Adaptation en longueur biomécanique	100 mm (en option)	180 mm (standard)	180 mm (standard)
Rappel de distribution des pressions	-	oui	oui
Inclinaison d'assise	30°/50°	30°/50°	22°
Élévation d'assise	300 mm	300 mm	200 mm
JAY & WHITMYER (BB)	oui	oui	oui
App Remote Seating	-	oui	oui
Charge max.	160 kg	160 kg	120 kg


SEDEO PRO

Un cadre d'assise entièrement réglable avec un grand choix de coussins confort et d'options de positionnement. Grâce à une large palette d'accoudoirs, de revêtements de repose-pieds, de coussins d'assise et de dossier, d'appui-têtes, d'éléments de positionnement, le système SEDEO PRO peut s'adapter de manière flexible à vos besoins personnels.



SEDEO ERGO

Système d'assise biomécanique de haute qualité avec un choix complet de positions programmables. SEDEO ERGO permet une adaptation de la longueur allant jusqu'à 180 mm grâce à son système biomécanique de dossier breveté. Il offre en outre une fonction biomécanique de repositionnement avec de nombreux réglages d'assise et de dossier, un transfert facilité, un angle de genou de 90° en position assise et un rappel de distribution des pressions.

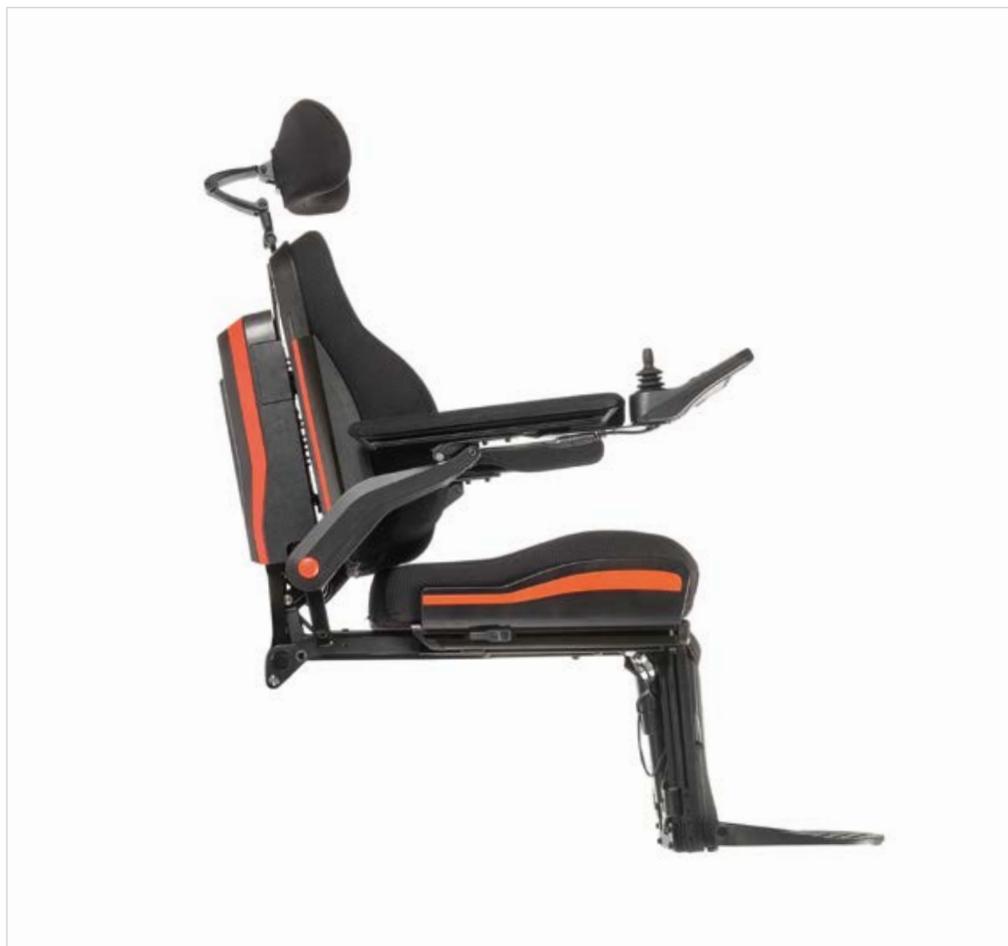**SEDEO ERGO UP**

Un système d'assise biomécanique de grande qualité avec le choix de 6 positions programmables, y compris une fonction debout. Il dispose de tous les avantages du système d'assise SEDEO ERGO avec en plus la fonction debout. Le système SEDEO ERGO UP offre un angle de position debout allant jusqu'à 185° en même temps qu'une très grande stabilité.



SEDEO PRO

Le système d'assise SEDEO PRO combine un cadre d'assise extrêmement complet et configurable avec un choix remarquable d'options de soutien et de positionnement. Entre autre une large palette de coussins d'assise et de dossier SEDEO PRO pour des besoins cliniques moyens ou faibles.

Le système d'assise SEDEO PRO offre confort et grande indépendance au quotidien.

ADAPTABLE RAPIDEMENT ET SIMPLEMENT

Le cadre d'assise SEDEO PRO dispose d'une grande flexibilité. Les réglages du système d'assise peuvent être exécutés par l'utilisateur du fauteuil lui-même. Adaptable simplement et rapidement avec un seul outil, vous personnalisez votre système d'assise et vous le conformez à vos exigences personnelles.

INCLINAISON D'ASSISE



ÉLEVATION D'ASSISE



SYSTÈME D'ASSISE ADAPTABLE À L'EXTRÊME



DOSSIER BIOMÉCANIQUE

Découvrez le nouveau dossier biomécanique (en option) qui permet une variation de longueur allant jusqu'à 100 mm. L'adaptation biomécanique de la longueur diminue les forces de cisaillement. Le dossier est disponible comme dossier fixe, réglable mécaniquement ou électriquement.

PALETTE RELEVABLE ÉLECTRIQUEMENT

Le repose-pied relevable avec adaptation de longueur vous permet de trouver la meilleure position. Il permet de maintenir en permanence la position optimale. Disponible en montage central ou version rétractable. Vous pouvez aussi choisir entre un repose-pied rétractable à 70° ou rétractable manuellement.

COUSSIN DE DOSSIER FLEXIBLE

Il existe un grand choix de coussins d'assise et de dossier pour le système d'assise SEDEO PRO, y compris un coussin de dossier flexible avec sangles adaptables et soutien latéral pour un confort exclusif et un positionnement facile.

OPTIONS DE POSITIONNEMENT


De nombreux éléments de positionnement comme par exemple les appui-têtes de SEDEO et WHITMYER, les pelotes latérales, les pelotes latérales pour genou ou cuisse, sont disponibles en option.

ACCOUDOIRS RELEVABLES

Les accoudoirs relevables simples à utiliser facilitent les transferts. Vous pouvez choisir entre une variante amovible ou solidaire du dossier. Tous les accoudoirs sont à combiner avec les rembourrages disponibles.

SEDEO ERGO

Essayez la différence avec le Q700 M SEDEO ERGO. La combinaison de tous les avantages du système d'assise SEDEO ERGO avec la fonction C-Me vous offre la possibilité d'une vie autonome.

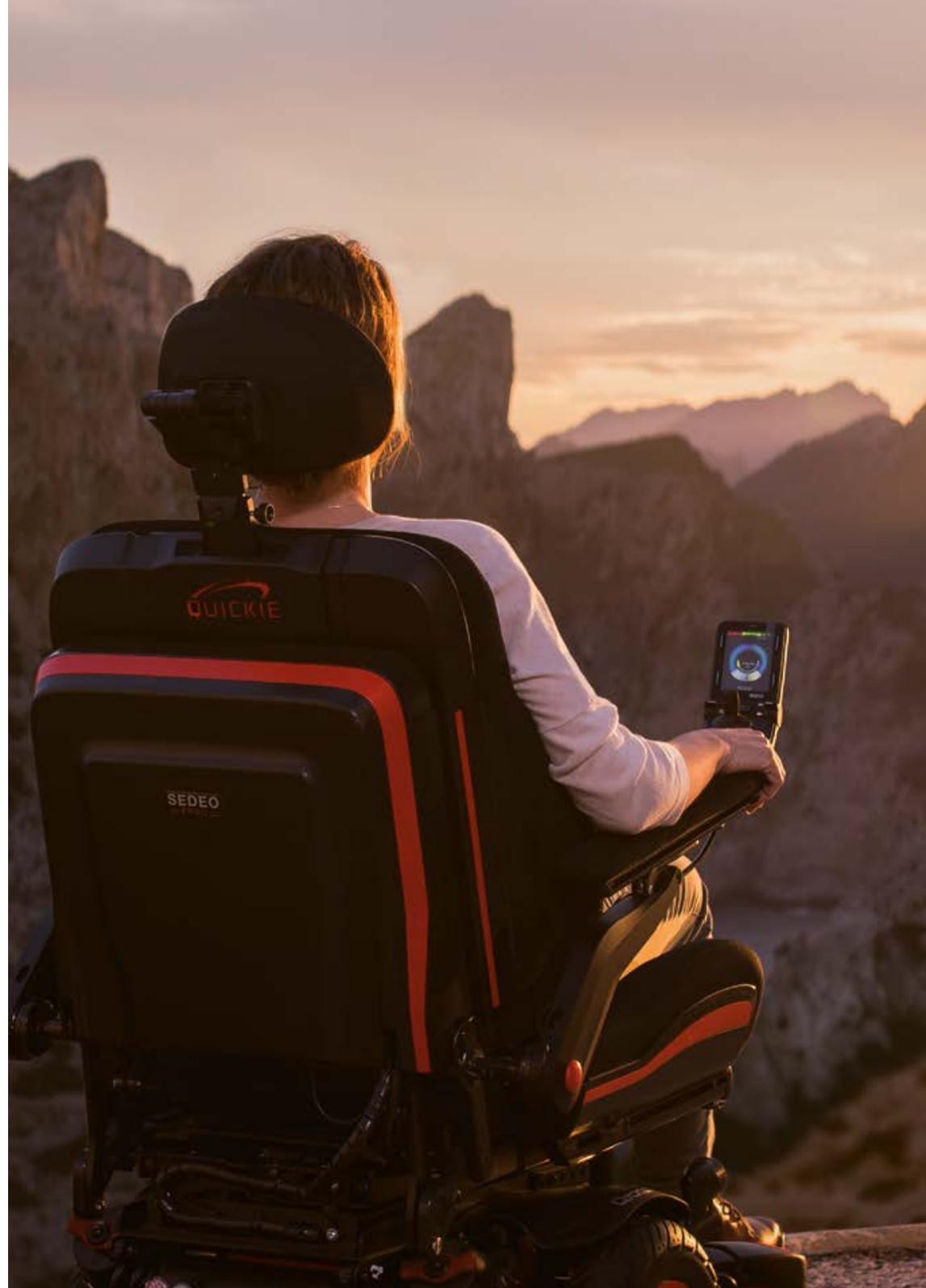

SYSTÈME D'ASSISE INTELLIGENT



REPOSITIONNEMENT BIOMÉCANIQUE

Revenir en position assise correcte à partir d'une position couchée ne nécessite la plupart du temps que l'utilisation de l'inclinaison d'assise. Lorsque vous changez de la position couchée à la position assise avec le repositionnement biomécanique breveté, vous passez d'abord par une position intermédiaire inclinée pour déplacer au moyen de la pesanteur votre bassin dans un mouvement doux et souple.

DOSSIER BIOMÉCANIQUE

Grâce au système de dossier biomécanique breveté permettant une adaptation de la longueur jusqu'à 180 mm, les commandes de tête et de menton restent dans la même position malgré le mouvement et le changement d'angle du dossier.

RAPPEL DE DISTRIBUTION DES PRESSIONS

Une fonction de rappel de distribution des pressions vous informe quand il est temps de changer de position assise. Un protocole peut être sauvegardé et partagé par courriel avec thérapeutes et médecins.

ADAPTABLE À VOS BESOINS

L'appui-tête premium est facilement réglable et complètement amovible. Toutes les largeurs et profondeurs d'assise sont adaptables en continu et avec un seul outil. Les largeurs de coussin d'assise et de dossier sont réglables indépendamment l'une de l'autre. La hauteur de l'accoudoir et les réglages d'angle se modifient aussi facilement.

INSTALLATION FACILITÉE


Les coussins d'assise sont composés de 3 parties. Les deux coussins latéraux peuvent être pivotés ou enlevés pour permettre un transfert confortable. La partie du milieu peut par exemple être remplacée par un coussin JAY.

PALETTE JUSQU'AU SOL

Comme il est possible de descendre les palettes jusqu'au sol, les transferts – pour sortir du fauteuil ou s'y installer – peuvent se faire debout.

SEDEO ERGO UP

Pour tous ceux qui veulent expérimenter la vie à partir d'une nouvelle hauteur : découvrez le SEDEO ERGO UP. Combinez tous les avantages du système d'assise SEDEO ERGO avec la possibilité d'être debout quand vous en avez envie.

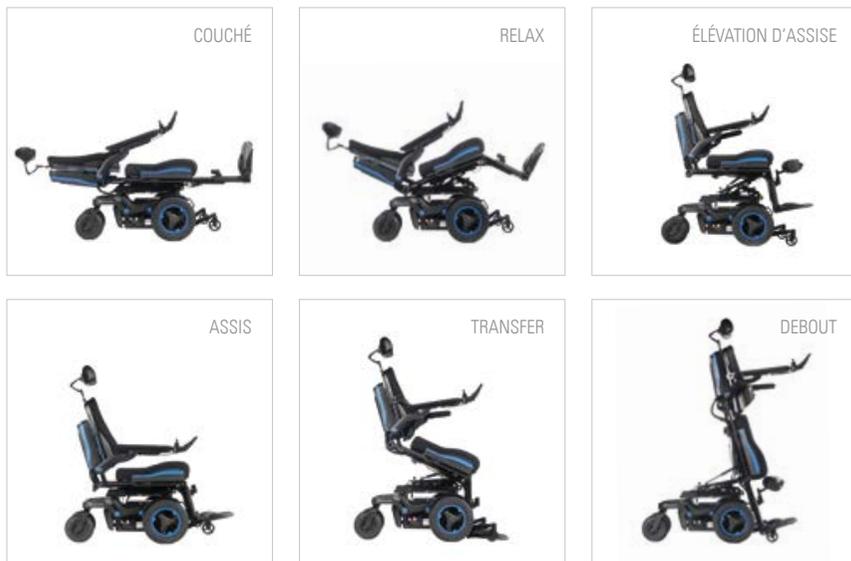

POSITIONS MÉMORISÉES

Chacune des six mémoires de position peut être programmée individuellement en appuyant sur le bouton Memory et en tirant le joystick en arrière pendant trois secondes. Un signal sonore confirme la programmation.



FONCTION DEBOUT



Le Q700-UP M vous permet d'être debout à tout moment ce qui entraîne aussi des avantages pour votre santé :

AVANTAGES DE LA POSITION DEBOUT

- facilite la respiration
- améliore la distribution des pressions
- soulage des organes comme les poumons, l'intestin et la vessie
- améliore la circulation sanguine
- réduit la spasticité
- favorise la santé osseuse et diminue les déformations du squelette
- renforce les systèmes cardiovasculaire et lymphatique
- tonifie les systèmes de soutien et de mouvement et prévient les déficiences articulaires

ANGLE DE GENOU DE 90°

Le nouveau repose-pied électrique central offre un véritable angle à 90° aux genoux en position assise. Le coussin de genou ergonomique est aussi réglable en largeur et profondeur.

JAY & WHITMYER

OPTIONS DE POSITIONNEMENT

Un grand nombre d'appui-têtes WHITMYER, de coussins d'assise et de dossier JAY se combinent avec SEDEO ERGO et SEDEO ERGO UP pour répondre aux différents besoins cliniques et garantir le meilleur positionnement possible.



APPUI-TÊTES WHITMYER

Afin de répondre aux exigences de positionnement, du soutien basique jusqu'aux multiples points de soutien, Whitmyer a développé différents appui-têtes.

Le système de fixation se combine parfaitement avec une série de coussinets et propose une large palette de solutions pour le soutien et/ou le contrôle de la colonne cervicale et de la tête.

COUSSINS & DOSSIERS JAY

Les coussins d'assise et de dossier JAY ont été développés pour une stabilité et une protection cutanée maximales. Ils s'adaptent facilement et séparément et peuvent ainsi répondre aux exigences de positionnement les plus diverses.



SWITCH-IT


APP REMOTE SEATING




L'app Remote Seating joue un rôle important dans la gestion de la distribution des pressions. Elle vous permet de surveiller l'évolution de votre distribution des pressions et de partager ces données avec votre réseau de soins. L'application suit les positions d'assise importantes comme par ex. l'inclinaison de l'assise, l'angle du dossier et la levée des jambes ainsi que la durée de ces positions.

DES DONNÉES. SI VOUS EN VOULEZ. OÙ VOUS EN VOULEZ.

L'app Switch-It Remote Seating* mesure en permanence l'angle d'assise et enregistre le temps que vous passez dans une certaine position. Elle participe ainsi à l'amélioration de votre santé générale et de votre bien-être en gérant la distribution des pressions et en prévenant les zones de charges.

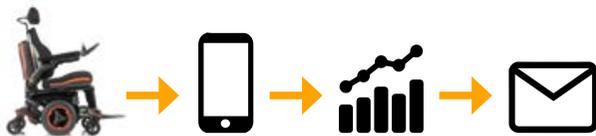

- La technologie Bluetooth se connecte sans câble avec le fauteuil roulant.
- Des rapports sur l'angle, la durée et l'inclinaison d'assise peuvent être établis en temps réel.
- Ces rapports peuvent être transmis par mail aux thérapeutes et aux médecins.
- Participe à la mise en place de plans de distribution de pressions.
- Avertit l'utilisateur pour qu'il modifie sa position assise.

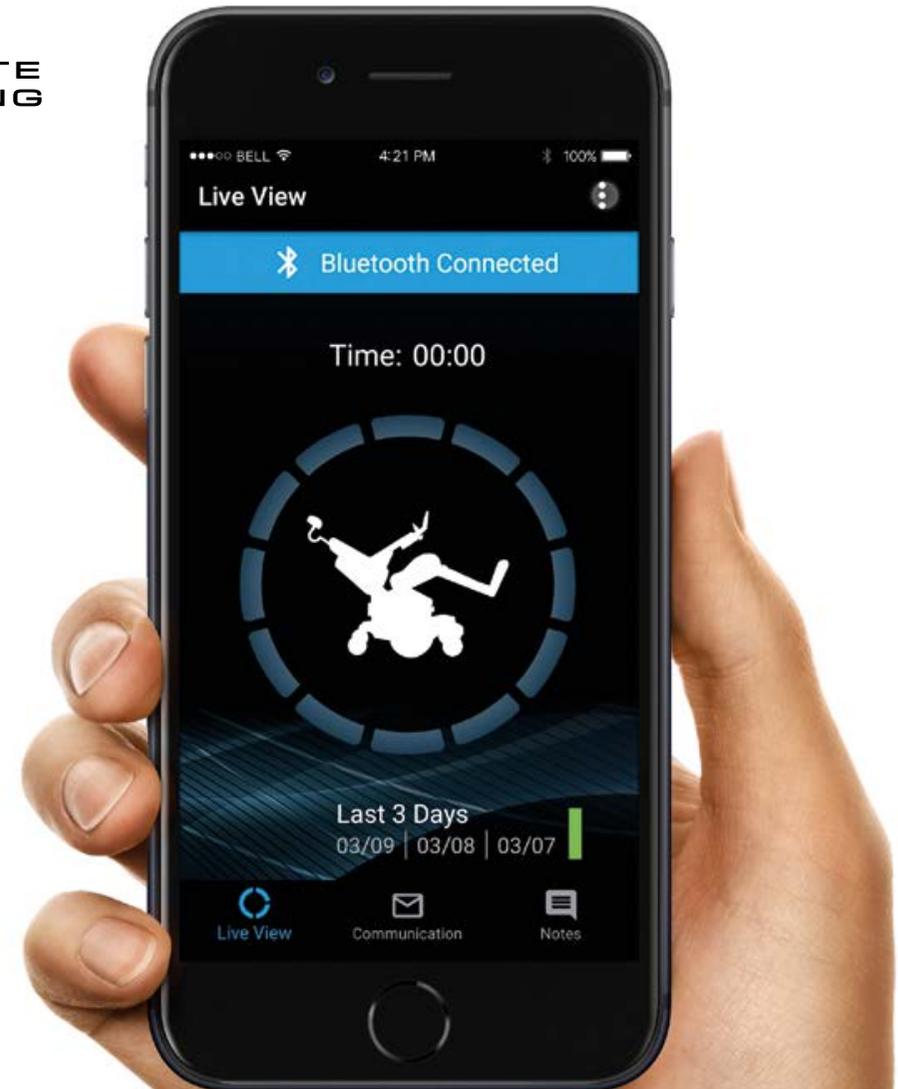

CONTRÔLE SUR SIMPLE PRESSION DE TOUCHE

Commander votre environnement avec une technologie innovante:
Avec votre Q700, vous pouvez utiliser par IR ou fonction Bluetooth des
appareils comme le portable, l'ordinateur et la tablette.



R-NET

ADVANCED JOYSTICK

Chaque fauteuil roulant de la série Q700 (équipement de base dépendant du système d'assise) dispose d'un module de commande innovant R-Net. Un grand écran HD très lisible et des touches faciles à utiliser permettent une utilisation intuitive.

CONNECTIVITÉ

Nouveau module de commande avec fonction infrarouge intégrée et écran multifonctions élargi. Ceci permet l'utilisation d'appareils équipés d'une interface infrarouge.

BLUETOOTH & IDEVICE

Commande facile du portable, de l'ordinateur, de la tablette et d'autres appareils (2 appareils Android/Windows et 2 IOS). Jusqu'à trois appareils peuvent être contrôlés par des modules Bluetooth séparés.

TECHNOLOGIE DE TOUCHES D'ATTRIBUTION BREVETÉE

La technologie de touches d'attribution brevetée par Sunrise Medical offre de multiples possibilités de software intégré faciles à utiliser pour améliorer la vie quotidienne.




SWITCH-IT

COMMANDES INNOVANTES

Avec la fonction Memory (disponible pour SEDEO ERGO et SEDEO ERGO UP) flexible dans chaque position, les fonctions d'assise prédéfinies peuvent être commandées à la demande par simple pression d'un bouton grâce à la Ctrl+5 Switch Box.

COMMANDES SPÉCIALES ALTERNATIVES

Si la conduite avec un joystick conventionnel n'est pas pour vous la meilleure option, vous pouvez bénéficier des avantages des périphériques d'entrée Switch-it et de l'entier potentiel de conduite de votre fauteuil électrique.

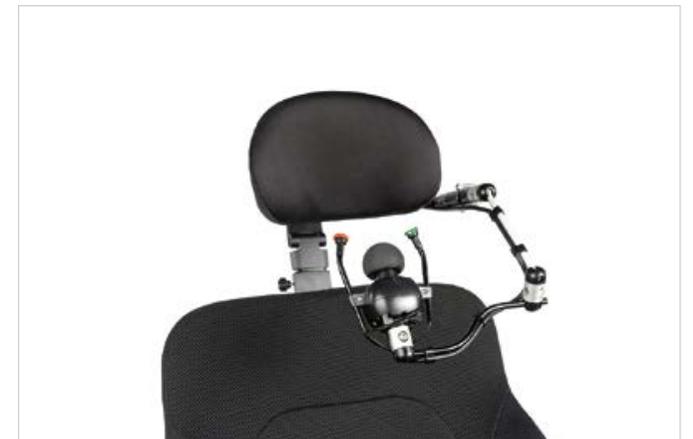

LINK-IT

SYSTÈME DE MONTAGE

Vous avez besoin d'interrupteurs ou de commandes spéciales supplémentaires ? Avec Link-it, le nouveau système de fixation de construction modulaire, rien n'est impossible.

D'innombrables combinaisons peuvent être réalisées avec les modules et les barres pour répondre aux différentes exigences. Link-it est non seulement très facile à positionner mais veille aussi à ce que le design minimaliste du fauteuil soit préservé. S'il faut un module de commandes supplémentaire, une touche sur le dossier ou un interrupteur sur l'appui-tête, Link-it, tout simplement !






QUICKIE



DESIGN ET LOOK

STYLE PERSONNALISÉ

Avec la série Q700, nous avons atteint un niveau supérieur dans le design. La base motrice noir mat en combinaison avec le système d'assise correspondant composent un design fin et moderne.

Personnalisez votre Q700 !

Donnez à votre fauteuil QUICKIE Q700 une note personnelle : en choisissant la touche de couleur qui vous correspond, vous pouvez compléter parfaitement le noir mat caractéristique de la base motrice.





Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter nos formulaires de commande ou contacter notre service client.

Sous réserve de modifications techniques, d'adaptations et de fautes d'impression.

